

**Время  
для себя!**



**Массажер для шеи  
КТ-5916**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Общие сведения .....                      | 4  |
| Комплектация .....                        | 4  |
| Устройство массажера для шеи .....        | 5  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 6  |
| Чистка и обслуживание .....               | 7  |
| Уход и хранение .....                     | 8  |
| Устранение неполадок .....                | 8  |
| Технические характеристики .....          | 9  |
| Меры предосторожности .....               | 10 |

## Общие сведения

Массажер для шеи КТ-5916 разминает зажатые мышцы, снимает напряжение, усталость и болевые ощущения в шее, особенно в длительных поездках. Массажер устраняет стресс и затекание мышц, воздействуя на шею массажными роликами.

Благодаря нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц шеи. Расслабление мышц шеи и улучшение кровотока также помогают избавиться от головных болей и проблем со сном. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто подолгу работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи. Роликовый массаж и тепло стимулируют и повышают тонус мышц шеи, расслабляют и снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови.

Массажер оснащен голосовым помощником, который при желании можно отключить.

Рекомендуемая продолжительность сеанса массажа составляет 15 минут. Через 15 минут массажер автоматически отключается. Не проводите более одного сеанса массажа подряд и более двух сеансов в день.

Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для шеи КТ-5916 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи в области шеи, например, ран, царапин или аллергических высыпаний.


Массажер работает от аккумулятора, что позволяет брать его с собой на работу, в поездки или путешествия.

## Комплектация

1. Массажер для шеи — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство массажера для шеи

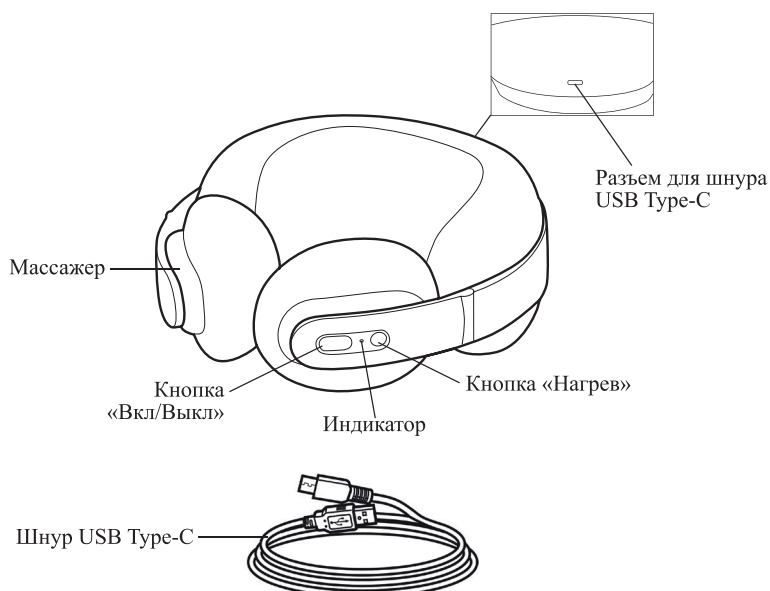

Чтобы включить или выключить массажер, нажмите и удерживайте **кнопку «Вкл/Выкл»** 1,5 секунды, прибор начнет работу, загорится **индикатор**. После включения массажер начинает работу с максимальной интенсивностью. Чтобы выбрать минимальную интенсивность массажа, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». При максимальной интенсивности массажные ролики крутятся быстрее. Чтобы поставить прибор на паузу, нажмите второй раз на кнопку «Вкл/Выкл». Чтобы продолжить работу прибора, нажмите третий раз на кнопку «Вкл/Выкл».

**Примечание.** Направление вращения массажных роликов меняется на противоположное автоматически каждые 3 минуты.

**Кнопка «Нагрев»** включает, циклически переключает уровни нагрева и отключает нагрев. Всего у прибора 2 уровня нагрева. Если вы хотите отключить голосовой помощник, нажмите на кнопку «Нагрев» и удерживайте ее в течение 1,5 секунд. Чтобы включить голосовой помощник, снова нажмите на кнопку «Нагрев» и удерживайте ее в течение 1,5 секунд.

В таблице ниже приведен цвет индикатора и при каком состоянии заряда данный цвет появляется.



| Цвет индикатора  | Описание                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Белый            | Уровень заряда батареи больше 25%                   |
| Оранжевый        | Низкий заряд батареи, пожалуйста, зарядите массажер |
| Светло-оранжевый | Во время зарядки                                    |
| Светло-зеленый   | Полный заряд                                        |

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите упаковочные материалы. Перед первым использованием зарядите прибор, как это описано в главе «Зарядка массажера».

Во время массажа расположите прибор так, чтобы кнопки управления находились с левой стороны.

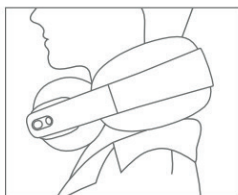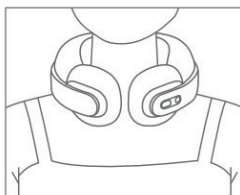

### Зарядка массажера

Перед первым включением зарядите массажер. Для этого подключите шнур USB Type-C к разъему, который располагается на корпусе прибора. Другой конец шнура подсоедините к источнику питания.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами  $\approx 5\text{ В}$ ,  $1\text{ А}$ . Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» мигает светло-оранжевым. При полном заряде индикатор загорается зеленым. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки вы не сможете пользоваться массажером.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

### Использование

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» 1,5 секунды. Устройство начнет выполнять массаж с максимальной интенсивностью, загорится индикатор.
2. Чтобы установить минимальную интенсивность, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
3. Чтобы поставить прибор на паузу, нажмите второй раз на кнопку «Вкл/Выкл». Чтобы продолжить работу прибора, нажмите третий раз на кнопку «Вкл/Выкл».
4. При желании вы можете включить нагрев, для этого нажмите на кнопку «Нагрев». Выберите один из уровней нагрева. Чтобы выключить нагрев, снова нажмите на кнопку «Нагрев».
5. Если вы хотите отключить голосовой помощник, нажмите на кнопку «Нагрев» и удерживайте ее в течение 1,5 секунд. Чтобы включить голосовой помощник, снова нажмите на кнопку «Нагрев» и удерживайте ее в течение 1,5 секунд.
6. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут. По истечении 15 минут устройство выключится. Для того, чтобы закончить массаж раньше, нажмите и

удерживайте 1,5 секунды кнопку «Вкл/Выкл», устройство выключится. Максимальное время работы массажера — 15 минут.

**Примечание.** Если вы хотите использовать массажер повторно, подождите минимум 30 минут, чтобы массажер не перегревался.

### **Советы**

Если вы чувствуете дискомфорт на любой интенсивности воздействия, немедленно прекратите массаж и обратитесь к врачу.

Длительность сеанса массажа не должна превышать 15 минут. По истечении 15 минут массажер автоматически отключается, даже если вы меняли интенсивность воздействия или включали нагрев. Не проводите более одного сеанса массажа подряд и более двух сеансов в день.

Если вы хотите включить массажер еще раз, например, для проведения сеанса массажа другому человеку, то подождите 20–30 минут, чтобы избежать перегревания устройства.

### **Меры предосторожности по применению**

Перед применением желательно проконсультироваться с врачом. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Существует ряд противопоказаний к применению:

- инфекционные заболевания кожи;
- остеопороз;
- наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора;
- злокачественные новообразования;
- повышенная температура;
- повреждения целостности кожного покрова в зоне массажа;
- переломы, вывихи, разрывы мышц и прочие повреждения;
- сахарный диабет;
- беременность;
- менструация;
- заболевания сердца,
- наличие ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
- нечувствительность к теплу;
- переутомление;
- возраст младше 16 лет.

### **Чистка и обслуживание**

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер и отключайте его от сети. Допускается протирать прибор мягкой сухой тканью.

Не погружайте прибор в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на массажные ролики, в область органов управления, на разъем шнура USB Type-C и сам шнур USB Type-C.

## Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите массажер, затем заряжайте в течение 1 часа.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикатор не горит

| Возможная причина    | Решение                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Аккумулятор разряжен | Зарядите массажер в соответствии с разделом «Зарядка массажера» |

### Массажер не работает, голосовые команды подаются

| Возможная причина | Решение                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Массажер отключен | Чтобы массажер начал работать, необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 1,5 секунд |

### Устройство работает, но голосовые команды не подаются

| Возможная причина              | Решение                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вы отключили голосовые команды | Чтобы включить голосовые команды, нажмите на кнопку «Нагрев» и удерживайте ее в течение 1,5 секунд |

### Массажер не заряжается

| Возможная причина                 | Решение                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Нет напряжения в сети             | Проверьте наличие напряжения в сети                                               |
| Ноутбук или компьютер не включены | Для зарядки массажера от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить |
| Пауэрбанк разряжен или не включен | Зарядите и включите пауэрбанк                                                     |
| Поврежден шнур USB Type-C         | Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А                       |

### Покраснение на коже

| Возможная причина                                                  | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Слишком высокая интенсивность воздействия или длительность массажа | Это не является неисправностью массажера. Чувствительная кожа может покраснеть, если установлена максимальная интенсивность или массаж длится слишком долго. Дождитесь, когда покраснение пройдет, в будущем используйте массажер на минимальной интенсивности и не превышайте рекомендуемое время массажа |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 1 А
2. Мощность: 6 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2,5 А\*ч (9,25 Вт\*ч)
5. Тип массажера: роликовый
6. Время зарядки: 2,5 ч
7. Время работы: 1,5–2 ч
8. Длина шнура USB Type-C: 0,5 м
9. Размер устройства: 201 × 210 × 90 мм
10. Размер упаковки: 228 × 228 × 96 мм
11. Вес нетто: 0,7 кг
12. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь Бэстдэй Илектрик Ко., Лтд. Билдинг 2, №32, Банминь Роуд, Цзянхай Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера для шеи вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на ролики, в область органов управления, на разъем шнура USB Type-C и шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответствен-

- ных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
  9. Не касайтесь металлических пластин и электродных накладок руками, когда массажер включен. Следите, чтобы дети не могли случайно дотронуться до металлических пластин или электродных накладок, когда массажер включен.
  10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
  11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
  12. Храните устройство в недоступных детям местах.
  13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
  14. При полной или частичной потере чувствительности не рекомендуется пользоваться прибором.
  15. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на ролики, в область органов управления, на разъем шнура USB Type-C и шнур USB Type-C.
  16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром USB Type-C или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
  17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
  18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
  19. Запрещено пользоваться прибором во время сна.
  20. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.
  21. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.



**Kitfort**

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87