

Время для себя!



**Массажер для ног
КТ-5963**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера для ног	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Массажер для ног КТ-5963 выполнит роликовый массаж ног и согреет их. Нагрев можно отключить или включить снова. Скорость движения роликов (интенсивность массажа) настраивается: вы можете выбрать минимальную, среднюю или максимальную скорость. Длительность массажа — 15 минут. По прошествии этого времени массажер автоматически отключится.

Такое разнообразие функций и настроек поможет вам подобрать наиболее комфортный и приятный массаж.

В стопах человека находится множество рефлексогенных зон, фасций и мышц. Прорабатывая их при помощи массажа, можно не только получить приятные ощущения, но и улучшить состояние здоровья в целом. Массаж стоп обладает следующими положительными эффектами: улучшает обменные процессы и процессы регенерации, снимает напряжение, активизирует кровообращение, снимает гипертонус мышц, помогает в борьбе с отечностью. Однако следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для ног КТ-5963 не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.


Чехол для ног съемный, что упрощает чистку массажера.

Комплектация


1. Массажер для ног с чехлом — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для ног

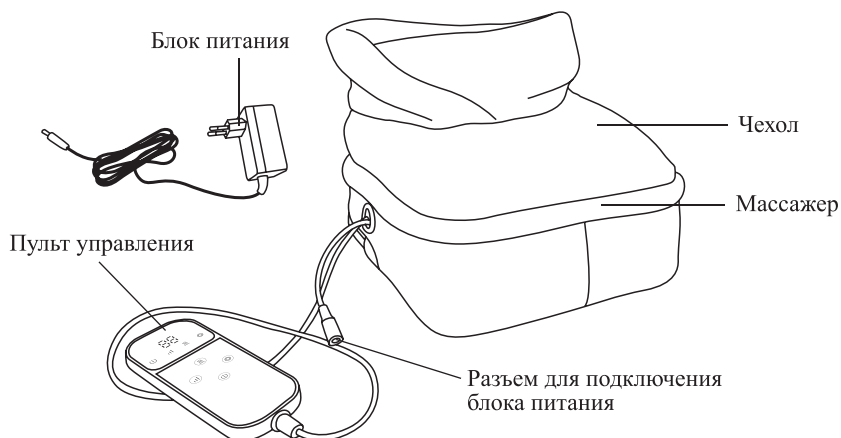

Панель управления

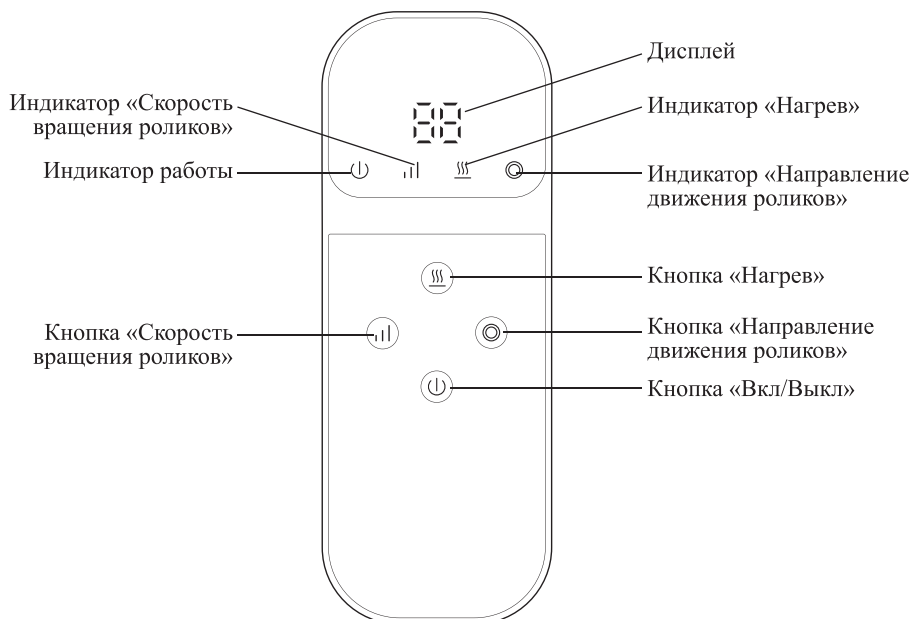

На **дисплее** горит надпись «OF», когда устройство подключено к сети. Когда устройство включено, на дисплее отображается оставшееся время работы массажера. Через 15 минут работы сработает автоотключение, на дисплее будет гореть надпись «OF».

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Когда устройство включено, горит **индикатор работы**.

Кнопка «Скорость вращения роликов» циклично меняет скорость вращения роликов. Цвет **индикатора «Скорость вращения роликов»** показывает, какая скорость выбрана: красный — максимальная, желтый — средняя, зеленый — низкая.

Кнопка «Нагрев» включает и отключает нагрев. Когда нагрев включен, горит **индикатор «Нагрев»**.

Кнопка «Направление движения роликов» циклично меняет направление вращения роликов. **Индикатор «Направление движения роликов»** горит зеленым цветом, когда ролики вращаются внутрь, и красным — когда вращаются наружу.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы.

Использование

1. Подключите шнур блока питания к разъему массажера, затем подключите блок питания к сети. На дисплее загорится надпись «OF».
2. Сядьте на диван или стул и займите удобное положение. Затем поставьте ноги в массажер.
Внимание! Не вставайте во время проведения массажа. Сеанс массажа проводится только сидя.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство. Загорится индикатор работы. На дисплее будет отображаться оставшееся время работы массажера. По умолчанию выбрана максимальная скорость движения роликов (индикатор «Скорость вращения роликов» горит красным), включен нагрев (горит индикатор «Нагрев»), ролики движутся внутрь (индикатор «Направление движения роликов» горит зеленым).
4. Нажмите на кнопку «Скорость вращения роликов», чтобы изменить скорость вращения роликов на среднюю. Индикатор «Скорость вращения роликов» загорится желтым. Нажмите на кнопку «Скорость вращения роликов» второй раз, чтобы изменить скорость вращения роликов на низкую. Индикатор «Скорость вращения роликов» загорится зеленым. Следующее нажатие на данную кнопку включит максимальную скорость вращения роликов. Индикатор «Скорость вращения роликов» загорится красным.
5. Нажмите на кнопку «Нагрев», чтобы выключить инфракрасный нагрев. Индикатор «Нагрев» погаснет. Чтобы снова включить нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев». Индикатор «Нагрев» загорится.
6. Нажмите на кнопку «Направление движения роликов», чтобы изменить вращение роликов. Индикатор «Направление движения роликов» загорится красным (движение наружу). Нажмите на данную кнопку второй раз, чтобы сменить направление вращения роликов. Индикатор «Направление движения роликов» загорится зеленым (движение внутрь).

7. Через 15 минут работы сработает автоотключение. Чтобы выключить массажер раньше автоматического отключения, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее будет гореть надпись «OF».

Примечание. Не включайте массажер более 2 раз подряд. Это может привести к перегреву массажера и сокращению срока службы. Перед повторным включением должно пройти не менее 30 минут.

8. Отключите устройство от сети. Дисплей погаснет.

Меры предосторожности по применению

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Существует ряд противопоказаний к применению:

- беременность;
- варикозное расширение вен, тромбофлебит;
- наличие имплантов, пластин;
- нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
- нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
- наличие кожных заболеваний;
- обострение хронических заболеваний;
- онкология;
- травмы, переломы;
- остеопороз;
- наличие электронных устройств при заболевании сердца, например кардиостимулятора;
- недавняя операция или ввод инъекций;
- гипертония;
- грипп, ОРВИ, повышение температуры;
- почечная недостаточность;
- сахарный диабет;
- гипогликемия;
- слабость, нервозность;
- переутомление.

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Время проведения массажа зависит от ощущений человека, в среднем 15 минут. Не рекомендуется использовать массажер дольше 15 минут.

Не давите ногами на массажер и не вставайте, когда ноги находятся в массажере. Для проведения массажа нужно сесть на диван, стул или кресло, принять удобное положение.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер.

При необходимости протирайте массажер слегка влажной мягкой тканью. Допускается использовать небольшое количество мягкого моющего средства для удаления пятен с массажера. Не используйте агрессивные моющие средства. Не скручивайте и не мните изделие во время чистки.

Регулярно стирайте чехол — он крепится на молнию к массажеру. Аккуратно отстегните чехол от устройства и постирайте вручную в теплой воде с мылом. После очистки дайте чехлу высохнуть естественным путем, а затем пристегните на молнию обратно.

Не используйте для стирки агрессивные моющие средства. Допускается стирать чехол в машине на режиме ручной стирки. Стирайте чехол при температуре не выше 40 °С. Не гладьте и не используйте для сушки сушильную машину. Не сушите чехол и массажер феном. Не допускайте попадания влаги внутрь массажера, на пульт управления, разъем для бока питания и блок питания.

Уход и хранение

Перед хранением очистите массажер, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите массажер в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Штекер блока питания не вставлен, либо вставлен не до конца в разъем на пульте управления	Плотно вставьте штекер блока питания в разъем на пульте управления

Массажер перегрелся

Возможная причина	Решение
Вы провели несколько сеансов подряд	Отключите массажер от источника питания и дайте ему остыть. Один сеанс массажа длится 15 минут, далее срабатывает автоотключение. Во избежание перегрева делайте перерыв на 30 минут после проведения двух сеансов массажа подряд

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60Гц, 0,8 А
 - выход: =12 В, 2 А
2. Мощность: 24 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - массажера: III
 - блока питания: II
4. Тип массажера: роликовый
5. Максимальная длина стопы: 28 см
6. Длина шнура пульта управления: 0,7 м
7. Длина шнура блока питания: 1,8 м
8. Размер устройства: 270 × 280 × 260 мм
9. Размер упаковки: 300 × 150 × 310 мм
10. Вес нетто: 1,4 кг
11. Вес брутто: 1,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажера или составных частей не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа массажера или его несоответствующего использования.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в массажер, на пульт управления, в разъем для блока питания или на блок питания не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие неправильной чистки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Массажер не предназначен для общественного использования, применения в медицинских учреждениях.
3. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
4. Перед подключением массажера к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте массажер, блок питания и пульт управления в воду и другие жидкости.
6. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания или пульта управления. Не тяните за шнур блока питания при отключении от электросети.
7. Не используйте устройство, если шнур блока питания или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

9. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
15. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, в разъем для бока питания, на блок питания и пульт управления.
16. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Во избежание перегрева во время использования никогда не накрывайте массажер и пульт управления чем-либо и не кладите пульт управления на массажер.
18. Не сворачивайте и не мните массажер во избежание выхода устройства из строя.
19. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
20. Данное устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
21. Массажер предназначен только для массажа ног. Не используйте устройство для проведения массажа других частей тела.
22. Не используйте массажер более 30 минут подряд. После этого сделайте перерыв на 30 минут для охлаждения устройства.



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru