

**Волшебное
искусство
отдыхать!**



**Массажный матрас
КТ-5929**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажного матраса	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Массажный матрас КТ-5929 поможет снять усталость и расслабить мышцы шеи, спины и ног. Устройство выполняет вибрационный, роликовый или вибрационно-роликовый массаж.

Встроенные в матрас вибрационные подушки позволяют провести вибрационный массаж, который подойдет для расслабления тела и снятия напряжения мышц. Массажные ролики воздействуют на мышцы, усиливая циркуляцию крови, а также они снимают напряжение, усталость и болевые ощущения в шее. Благодаря нагреву эффективность массажа повышается, и достигается лучшее расслабление мышц.

Вы можете вручную изменить интенсивность вибрации и зону массажа (шея, спина, пояс, ноги или все зоны одновременно). Также у прибора есть 5 программ работы, которые отличаются последовательностью зон массажа и временем работы для каждой зоны.

Массажный матрас можно собрать и зафиксировать ремнем для удобного хранения, а пульт управления сложить в специальный карман. Также есть ручка для переноски.

Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.


Массажный матрас КТ-5929 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Его также можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажный матрас с пультом управления — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажного матраса

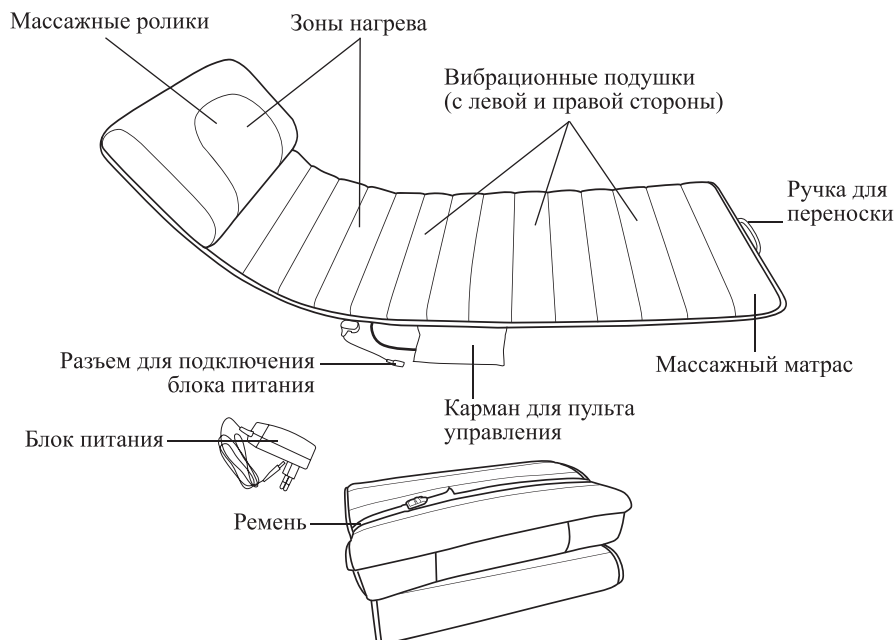

Пульт управления

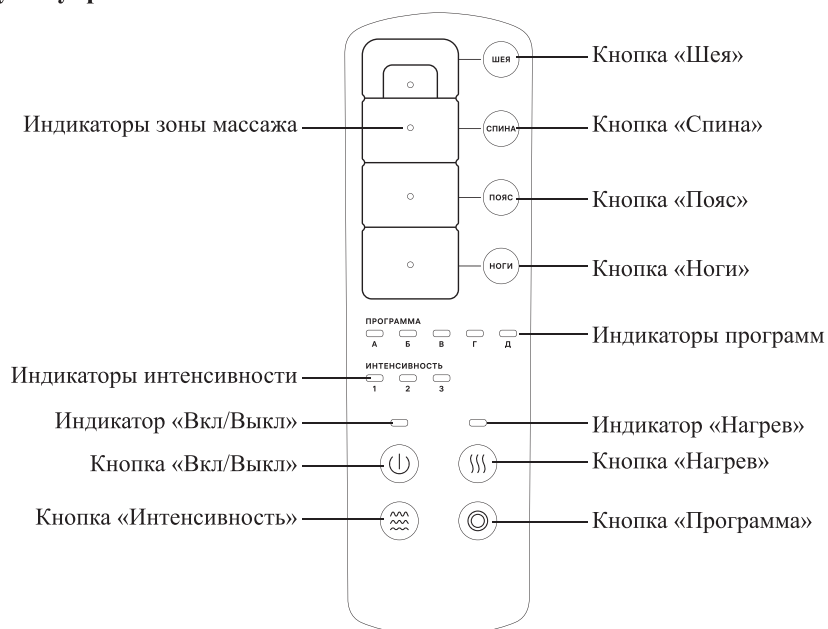

Управление массажным матрасом осуществляется с помощью *пульта*.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает прибор. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для включения прибора. При включении устройство сразу запускает массаж. Горит индикатор «Вкл/Выкл» и индикаторы параметров, установленных по умолчанию. Чтобы прекратить массаж, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». При выключении индикация погаснет, все параметры работы сбросятся.

Кнопка «Нагрев» включает и выключает нагрев в зоне шеи и спины. Температура нагрева составляет 45–55 °С. По умолчанию нагрев выключен. Нажмите на кнопку «Нагрев», чтобы включить нагрев, индикатор «Нагрев» загорится.

Кнопка «Интенсивность» циклически переключает низкий, средний и высокий уровень интенсивности вибрации. По умолчанию выбран средний уровень интенсивности, горит индикатор «2». Нажмите на кнопку «Интенсивность» один раз для выбора высокого уровня интенсивности (загорится индикатор «3») или два раза для выбора низкого уровня интенсивности (загорится индикатор «1»). Обратите внимание, что можно изменить только интенсивность вибрации. Интенсивность работы массажных роликов изменить нельзя.

Кнопка «Программа» циклически переключает программы работы вибрационных подушек. Всего у прибора предусмотрено 5 программ, которые отличаются последовательностью зон массажа и временем работы для каждой зоны. По умолчанию установлена первая программа (горит индикатор «А», индикаторы зон массажа будут мигать в соответствии с программой). Нажимайте на кнопку «Программа» для переключения программ. Индикатор выбранной программы загорится.

Примечание. При нажатии на кнопки «Спина», «Пояс» или «Ноги» программа выключится, и будет включен непрерывный массаж выбранной зоны, а также роликовый массаж зоны шеи. Выбрать зону вибрационного массажа для программы нельзя, так как в программах предусмотрена автоматическая смена зон. Отключение или включение роликового массажа в зоне шеи не влияет на работу автоматической программы.

Кнопки «Шея», «Спина», «Пояс» и «Ноги» включают и выключают массаж для выбранной зоны. По умолчанию установлен массаж для всех зон. При выборе одной зоны массажа на пульте будет непрерывно гореть соответствующий индикатор, при отключении массажа для данной зоны индикатор погаснет. При выборе автоматической программы индикаторы будут автоматически загораться и гаснуть в соответствии с программой.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажный матрас из коробки и удалите весь упаковочный материал. Растегните ремни массажного матраса, разложите прибор и протрите его влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажного матраса, на пульт управления, блок питания и в разъем для подключения блока питания.

Поместите прибор на кровать или диван и разложите его.

Перед выполнением массажа убедитесь, что ваша кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.

Подключите блок питания к разъему для подключения блока питания, а затем к сети электропитания.

Использование

1. Лягте на массажный матрас и расслабьтесь.
2. Чтобы включить массажный матрас, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте. Прибор начнет работу с параметрами, установленными по умолчанию. На пульте будет гореть индикатор «Вкл/Выкл», программа «А» (индикаторы зон массажа будут мигать в соответствии с программой), интенсивность «2».
3. Нажимайте на кнопку «Программа», чтобы выбрать одну из программ работы вибрационных подушек. Индикатор выбранной программы загорится.
4. Нажимайте на кнопки «Шея», «Спина», «Пояс» и «Ноги», чтобы выбрать массаж для определенной зоны.

Примечание. При нажатии на кнопки «Спина», «Пояс» или «Ноги» программа выключится, и будет включен непрерывный массаж выбранной зоны, а также роликовый массаж зоны шеи. Выбрать зону вибрационного массажа для программы нельзя, так как в программах предусмотрена автоматическая смена зон. Отключение или включение роликового массажа в зоне шеи не влияет на работу автоматической программы.

5. Нажимайте на кнопку «Интенсивность», чтобы изменить уровень интенсивности вибрации. Индикатор выбранного уровня интенсивности загорится.
6. Нажмите на кнопку «Нагрев», чтобы включить функцию нагрева. Нажмите на кнопку «Нагрев» еще раз для выключения данной функции.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить прибор. Индикация погаснет, все параметры работы сбросятся.

Примечания. Не рекомендуется использовать массажный матрас более 30 минут подряд. Не превышайте время использования массажного матраса, чтобы не навредить своему здоровью. Во избежание срабатывания защиты от перегрева необходимо подождать 30 минут перед следующим циклом массажа. Если вы только начали пользоваться массажным матрасом, то не рекомендуются частые повторы сеансов. Увеличивайте количество сеансов и интенсивность массажа постепенно.

8. После завершения работы массажного матраса отключите его от сети питания.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - тромбофлебит, варикоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);

- нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.
4. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажный матрас сухой или слегка влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажный матрас.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажного матраса, на пульт управления, блок питания и в разъем для подключения блока питания.

Уход и хранение

Перед тем как убрать на хранение, очистите массажный матрас, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Вы можете расположить пульт управления в специальном кармане и сложить массажный матрас, зафиксировав его с помощью специального ремня. На длительное хранение уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Храните массажный матрас в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в помещении с высокой температурой.

Устранение неполадок

Массажный матрас не включается, индикация на пульте не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажный матрас не подключен к блоку питания, или блок питания не подключен к сети питания	Подключите массажный матрас к блоку питания, а блок питания к сети питания

Массажный матрас выключился во время работы

Возможная причина	Решение
Массажный матрас перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети электропитания, сделайте перерыв на 30 минут и попробуйте включить снова

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,8 А
 - выход: =12 В, 2,5 А
- Мощность: 30 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
- Тип массажера: вибрационно-роликовый
- Длина шнура блока питания: 1,8 м
- Размер устройства: 550 × 1710 × 107 мм
- Размер упаковки: 565 × 265 × 445 мм
- Вес нетто: 3,1 кг
- Вес брутто: 3,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.



Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажного матраса или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажного матраса, на пульт управления, блок питания и в разъем для подключения блока питания не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие превышения времени использования не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажный матрас, взявшись за шнур пульта управления, блока питания или за разъем для подключения блока питания. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если блок питания или другие части массажного матраса повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажным матрасом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажного матраса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажного матраса, на пульт управления, блок питания и в разъем для подключения блока питания.
15. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87