


**Получай
удовольствие!**

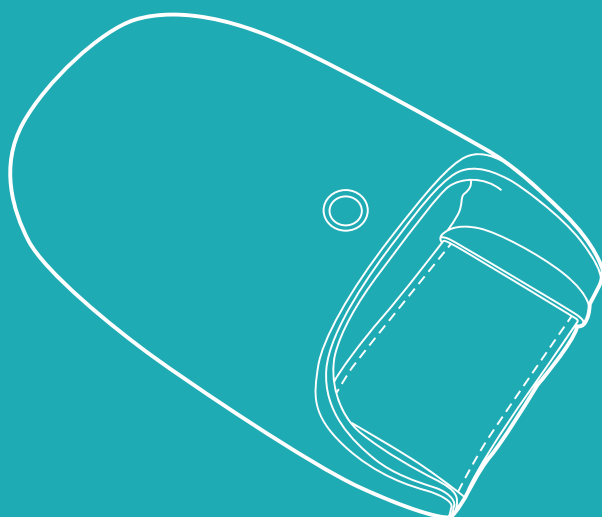

**Массажер для рук
КТ-5956**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство массажера для рук.....	5
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	12
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	15
Мобильное приложение Kitfort.....	18

Общие сведения

Массажер для рук КТ-5956 помогает снять напряжение в кистях и запястьях, снизить усталость и болевые ощущения в руках, а также может согреть или охладить ваши ладони, уменьшить онемение или отек пальцев рук. Данное устройство улучшает кровообращение и способствует сохранению красоты и молодости ваших рук. Массажер для рук будет особенно полезен тем, кто занимается длительной механической работой и подвергает руки высокой или длительной монотонной нагрузке, например офисным сотрудникам, музыкантам или домохозяйкам.

Массажер для рук воздействует несколькими способами: воздушные подушки оказывают давление на руку со всех сторон, а ролики снизу вращаются. Прессотерапия (лимфодренаж, пневмомассаж) в сочетании с роликовым массажем способствует расслаблению мышц и снятию спазмов и зажимов в мышечной ткани. За счет специального тканевого покрытия массажер для рук оказывает стимулирующее воздействие на кровоток и лимфоток, а также осуществляет точечный массаж акупунктурных точек ладони. Воздействие на конкретные биологически активные точки на ладонях помогает улучшить обмен веществ и нормализовать работу внутренних органов, поэтому использование массажера для рук может благоприятно повлиять на весь организм.

В приборе предусмотрено 6 автоматических программ воздушно-компрессионного массажа, которые отличаются последовательностью зон массажа и временем воздействия на каждую зону: четыре программы предназначены для массажа всех зон руки, одна программа — для массажа ладони, еще одна программа — для массажа запястья. Для каждой программы можно выбрать интенсивность давления от 1 до 6.

Встроенный таймер позволяет настроить время автоотключения массажера через 10, 15 или 20 минут работы. Оставшееся время работы можно посмотреть на дисплее, что очень удобно: вам не придется самостоятельно контролировать время процедуры, и устройство выключится автоматически по истечении таймера.

Устройство имеет функции нагрева и охлаждения. Благодаря нагреву эффективность массажа повышается, расслабление мышц достигается быстрее. Нагрев делает кожу рук нежной и гладкой. Охлаждение удобно использовать для более комфортного массажа в теплое время года. Охлаждение также обладает расслабляющим эффектом.

Для зарядки аккумулятора используется комплектный шнур USB Type-C, который присоединяется к блоку питания с выходными параметрами ± 5 В, 2 А (в комплект не входит) или к стороннему источнику питания (ноутбуку или пауэрбанку). При полном заряде аккумулятора время работы устройства составляет 2 часа при использовании без дополнительных функций, при включении роликового массажа, нагрева или охлаждения время работы — 1,5 часа.

За счет небольшого веса и работы от аккумулятора массажер для рук КТ-5956 можно использовать в любом удобном для вас месте и брать с собой в поездки.

Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Перед использованием прибора обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». Массажер для рук можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.




Данное устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Комплектация


1. Массажер для рук — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для рук

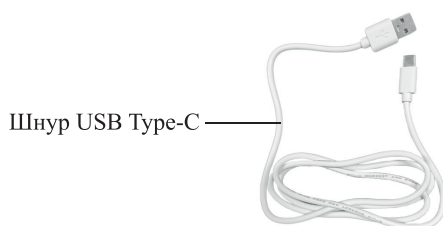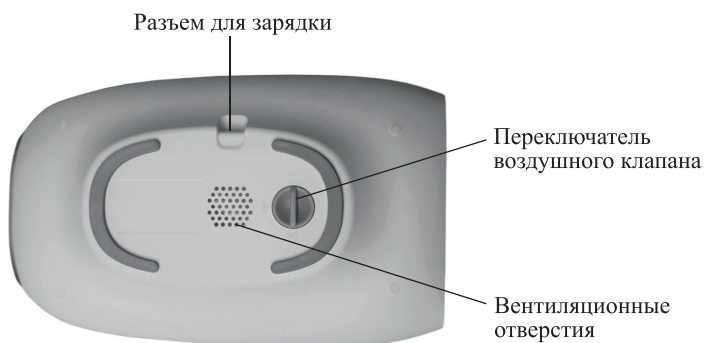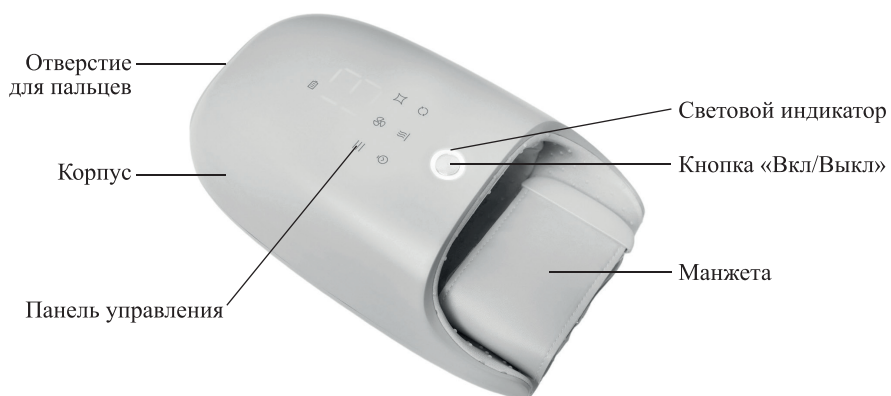

Панель управления

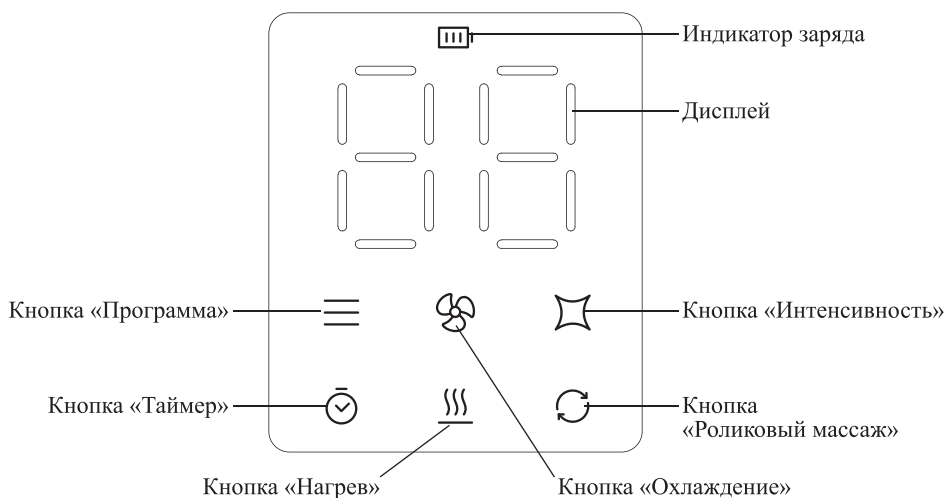

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Для включения необходимо нажать и удерживать данную кнопку, пока не загорится **световой индикатор**, — воздушно-компрессионный массаж начнется сразу. По умолчанию выбрана программа «1» с интенсивностью «3», на дисплее будет гореть цифра «1» слева и цифра «3» — справа. Нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» в процессе работы останавливают и запускают воздушно-компрессионный массаж. Во время паузы световой индикатор мигает, таймер не останавливается. Чтобы выключить устройство, нужно нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл», пока световой индикатор не погаснет.

Внимание! Массажер должен использоваться не более 30 минут подряд. После этого необходимо сделать перерыв на 30 минут для охлаждения устройства.

Кнопка «Программа» циклически переключает 6 автоматических программ воздушно-компрессионного массажа. В каждой программе задана определенная последовательность воздействия на три зоны, которые показаны на рисунке ниже.



Номер программы будет отображаться на дисплее слева:

- «1» — общий массаж (все зоны),
- «2» — круговой массаж (цикл из массажа первой и третьей зоны + массажа всех зон),
- «3» — расслабляющий массаж (все зоны),
- «4» — мягкий массаж (все зоны),
- «5» — массаж ладони (только первая и вторая зоны),
- «6» — массаж запястья (только вторая и третья зоны).

Кнопка «Интенсивность» позволяет выбрать интенсивность давления во время воздушно-компрессионного массажа, где «1» — слабая, а «6» — сильная интенсивность. Интенсивность отображается на дисплее справа.

С помощью **кнопки «Таймер»** устанавливается время автоотключения прибора: 10, 15 или 20 минут. По умолчанию настроен таймер на 10 минут. Чтобы во время массажа на дисплее отобразилось оставшееся время работы, необходимо нажать на кнопку «Таймер». Последующие нажатия позволяют изменить время автоотключения.

Кнопка «Роликовый массаж» включает и выключает вращение роликов на дне массажера (с внутренней стороны ладони), а также переключает направление их вращения. При первом нажатии на данную кнопку включается вращение роликов по часовой стрелке, индикатор кнопки «Роликовый массаж» горит зеленым. Второе нажатие на кнопку «Роликовый массаж» включает вращение роликов против часовой стрелки, индикатор данной кнопки горит синим. Для выключения роликового массажа необходимо нажать на кнопку «Роликовый массаж» третий раз, индикатор данной кнопки будет гореть белым.

Примечание. При включении роликового массажа звук работы массажера становится громче.

Кнопка «Охлаждение» позволяет включить и выключить вентилятор, чтобы охладить руку внутри массажера. По умолчанию охлаждение включено, индикатор данной кнопки горит зеленым. Когда охлаждение выключено, индикатор кнопки «Охлаждение» горит белым.

Кнопка «Нагрев» включает и выключает нагрев, а также переключает две степени нагрева. Для включения сильного нагрева нужно нажать на кнопку «Нагрев» один раз, индикатор данной кнопки будет ярко гореть красным. Для включения слабого нагрева необходимо нажать на кнопку «Нагрев» еще раз, индикатор данной кнопки будет тускло гореть красным. Для выключения нагрева нужно нажать на кнопку «Нагрев» третий раз, индикатор данной кнопки будет гореть белым. Температура слабого нагрева составляет 40 ± 2 °C, температура сильного нагрева — 43 ± 2 °C.

Примечания. Роликовый массаж, нагрев и охлаждение работают независимо от воздушно-компрессионного массажа, поэтому они не будут выключены, если вы нажмете на кнопку «Вкл/Выкл». Для выключения данных функций используются только одноименные кнопки, как описано выше.

Вы можете включить или охлаждение, или нагрев. Использование этих функций одновременно не предусмотрено. Если нажать на кнопку «Охлаждение», когда нагрев включен, он выключится автоматически. Если нажать на кнопку «Нагрев», когда включено охлаждение, оно выключится автоматически.

Нажатия на кнопки сопровождаются звуковыми сигналами.

Благодаря липучкам размер *манжеты* регулируется, что позволяет удобно зафиксировать руку.

Переключатель воздушного клапана, расположенный на дне прибора, позволяет быстро спустить воздух из воздушных подушек и сбросить давление внутри массажера. Для этого необходимо повернуть переключатель воздушного клапана в положение «OFF».

Внимание! Если переключатель воздушного клапана находится в положении «OFF», воздушные подушки не будут надуваться. Перед началом работы нужно повернуть переключатель воздушного клапана в положение «ON».

Индикатор заряда отображает текущий уровень заряда аккумулятора во время работы устройства. Чем больше делений индикатора заряда горит, тем выше уровень заряда. Если во время работы мигает только одно деление индикатора заряда, аккумулятор необходимо зарядить.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер для рук из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не помещайте массажер для рук в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, в разъем для зарядки, вентиляционные отверстия и на шнур USB Type-C.

Перед использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Установите массажер для рук на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола. Подключите шнур USB Type-C к разъему для зарядки, а затем к источнику питания. Для зарядки устройства используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\approx 5\text{ В}$, 2 А (в комплект не входит). Также вы можете заряжать устройство через компьютер или пауэрбанк.

Если во время работы мигает только одно деление индикатора заряда, аккумулятор необходимо зарядить. Аккумулятор можно заряжать с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Время полной зарядки составляет 3–4 часа. Во время зарядки на панели управления горит только индикатор заряда. Деления данного индикатора будут загораться постепенно. Когда все три деления индикатора заряда будут гореть непрерывно, это будет означать, что устройство полностью заряжено.

Внимание! Во время зарядки устройство нельзя включать.

После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Если устройство перевозится или доставляется до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой следует подождать, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

Храните прибор при температуре от 0 до 40 °С. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его наполовину каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Использование

1. Проверьте, что переключатель воздушного клапана находится в положение «ON».
2. Снимите все аксессуары: кольца, часы, браслеты. Убедитесь, что кожа рук чистая, или используйте одноразовые целлофановые перчатки.
3. Раскройте манжету и поместите руку в устройство тыльной стороной вверх. Ладонь будет расположена на массажных роликах, пальцы могут доставать до отверстия для пальцев. Расслабьте руку и закрепите манжету вокруг запястья.

Примечания. Не используйте массажер с незафиксированной манжетой.

Вы можете поместить руку в массажер, расположив прибор на столе и положив локоть на стол. Также можно держать массажер для рук на весу.

4. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», пока не загорится световой индикатор. Воздушно-компрессионный массаж начнется сразу. По умолчанию выбрана программа «1» с интенсивностью «3», на дисплее будет гореть цифра «1» слева и цифра «3» — справа. Охлаждение будет включено, индикатор кнопки «Охлаждение» будет гореть зеленым.

Примечание. Во время работы устройство издает звук, похожий на вибрацию, это нормально и не является неисправностью. Если звук почти не слышен, а воздушные подушки не надуваются, необходимо проверить переключатель воздушного клапана (он должен находиться в положение «ON»).

Внимание! Не используйте массажер для рук во время занятий, требующих высокой концентрации внимания и быстрой реакции, например во время управления транспортным средством.

5. Для изменения программы воздушно-компрессионного массажа нажимайте на кнопку «Программа». На дисплее слева отобразится номер программы. Программы отличаются последовательностью массажных зон, как показано в таблице ниже (зоны воздействия выделены черным).

Номер программы	Вид массажа	Схема воздушно-компрессионного массажа
1	Общий	
2	Круговой	
3	Расслабляющий	
4	Мягкий	
5	Массаж ладони	
6	Массаж запястья	

6. Для изменения интенсивности воздушно-компрессионного массажа нажимайте на кнопку «Интенсивность». Интенсивность отображается на дисплее справа: «1» — слабая, а «6» — сильная интенсивность.

Примечание. Рекомендуется начинать воздушно-компрессионный массаж с самой слабой интенсивности, постепенно повышая ее, чтобы подобрать наиболее подходящие для вас настройки.

7. Чтобы выключить вентилятор, нажмите на кнопку «Охлаждение», индикатор данной кнопки будет гореть белым. Чтобы снова включить охлаждение, нажмите на кнопку «Охлаждение» еще раз, индикатор данной кнопки будет гореть зеленым.

Примечание. Вы можете включить или охлаждение, или нагрев. Использование этих функций одновременно не предусмотрено. Если нажать на кнопку «Охлаждение», когда нагрев включен, он выключится автоматически.

8. Чтобы включить сильный нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев». Индикатор данной кнопки будет ярко гореть красным. Чтобы переключить на слабый нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев» еще раз. Индикатор данной кнопки будет тускло гореть красным. Для выключения нагрева нажмите на кнопку «Нагрев» третий раз, индикатор данной кнопки будет гореть белым.

Примечания. Если нажать на кнопку «Нагрев», когда включено охлаждение, оно выключится автоматически.

Температура слабого нагрева составляет 40 ± 2 °C, температура сильного нагрева — 43 ± 2 °C.

Нагрев производится сверху, вы ощутите его тыльной стороной руки. Потребуется подождать несколько минут, прежде чем вы почувствуете заметное повышение температуры.

9. Если вы хотите добавить роликовый массаж, нажмите на кнопку «Роликовый массаж». Ролики на дне массажера (с внутренней стороны ладони) начнут вращаться по часовой стрелке, индикатор кнопки «Роликовый массаж» будет гореть зеленым. Чтобы изменить направление вращения роликов, нажмите на кнопку «Роликовый массаж» еще раз — ролики начнут двигаться против часовой стрелки, индикатор кнопки «Роликовый массаж» будет гореть синим. Для выключения роликового массажа нажмите на кнопку «Роликовый массаж» третий раз, индикатор данной кнопки будет гореть белым.

10. Чтобы остановить воздушно-компрессионный массаж, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», световой индикатор будет мигать. Чтобы снова запустить воздушно-компрессионный массаж, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Во время паузы таймер не останавливается, имейте в виду, что устройство все равно выключится автоматически по истечении таймера.

Примечания. Не пытайтесь вынуть руку во время воздушно-компрессионного массажа, сначала остановите его, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Когда воздух в воздушных подушках будет спущен, вы легко освободите руку.

Роликовый массаж, нагрев и охлаждение работают независимо от воздушно-компрессионного массажа, поэтому они не будут выключены, если вы нажмете на кнопку «Вкл/Выкл». Для выключения данных функций используются только одноименные кнопки.

Внимание! В случае необходимости вы можете спустить воздух из воздушных подушек и сбросить давление внутри массажера, повернув переключатель воздушного клапана в положение «OFF».

11. Чтобы настроить время автоотключения, нажимайте на кнопку «Таймер». Нажатия на данную кнопку циклически переключают время работы массажера: 10, 15 или 20 минут.

Примечание. Если отсчет времени уже начался (прошла 1 минута после включения), то первое нажатие на кнопку «Таймер» отобразит оставшееся время работы. Последующие нажатия на данную кнопку будут изменять время автоотключения.

12. Массажер для рук выключится автоматически по истечении установленного таймера. Чтобы выключить устройство раньше, нажимите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», пока световой индикатор не погаснет.

Внимание! Не используйте массажер более 30 минут подряд. После этого сделайте перерыв на 30 минут для охлаждения устройства.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - инфекционные и грибковые заболевания кожи;
 - острые суставные боли воспалительного характера;
 - псориаз или атопический дерматит на руках и запястьях;
 - тромбофлебит, варикоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - протезы из металла в зоне воздействия;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление.



4. Необходимо использовать массажер для рук с особой осторожностью в случаях:
 - беременности;
 - нечувствительности к нагреву;
 - чувствительной кожи.
5. Детям до 12 лет разрешается пользоваться устройством в присутствии взрослых.
6. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, обратитесь к врачу.

Советы

Из-за специального тканевого покрытия после воздушно-компрессионного массажа на руках останутся следы, это нормально. Следы исчезнут в течение часа.

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Ощущения покалывания является нормальным во время любого вида массажа. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, уменьшите интенсивность.

Для более глубокого ухода за кожей рук нанесите крем, наденьте одноразовые полиэтиленовые перчатки и проведите сеанс массажа.

Используя одноразовые полиэтиленовые перчатки, вы сможете содержать в чистоте тканевое покрытие массажера.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не помещайте массажер для рук в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, в разъем для зарядки, вентиляционные отверстия и на шнур USB Type-C.

Перед использованием массажера убедитесь, что руки чистые, или используйте одноразовые целлофановые перчатки. Необходимо поддерживать чистоту тканевого покрытия массажера, т.к. стирка массажера невозможна. Для очистки тканевого покрытия допускается использовать влажные салфетки, а также ткань или губку, смоченную водой. Вы можете использовать небольшое количество мягкого моющего средства для удаления пятен с массажера. Не используйте агрессивные химические средства. После очистки дайте массажеру высохнуть естественным путем. Не сушите массажер на солнце. Не используйте массажер, если он влажный.

Уход и хранение

Храните устройство при температуре от 0 до 40 °C в сухом месте, недоступном для детей.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. На длительное хранение уберите массажер для рук в пакет или коробку для защиты от пыли.

При длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости аккумулятора. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 1,5–2 часов. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и выйти из строя.

Устранение неполадок

Массажер для рук не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда аккумулятора	Зарядите аккумулятор, как описано в разделе «Зарядка аккумулятора»

Массажер для рук выключился во время работы

Возможная причина	Решение
Массажер выключился автоматически по истечении установленного таймера	При необходимости включите устройство снова. Чтобы настроить время автоотключения, нажимайте на кнопку «Таймер»
Аккумулятор разрядился	Зарядите аккумулятор, как описано в разделе «Зарядка аккумулятора»

Эффект массажа не ощущается

Возможная причина	Решение
Воздушные подушки не надуваются, звук работы очень тихий	Проверьте переключатель воздушного клапана. Переключатель воздушного клапана должен находиться в положении «ON»
Низкая интенсивность	Увеличьте интенсивность, нажимая на кнопку «Интенсивность»
Положение руки неверное	Поместите руку в устройство тыльной стороной вверх. Ладонь будет расположена на массажных роликах, пальцы могут доставать до отверстия для пальцев. Расслабьте руку и закрепите манжету вокруг запястья. Не используйте массажер с незафиксированной манжетой

Аккумулятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 2 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 3 А*ч (11,1 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки: 3–4 ч
6. Время работы: 1,5–2 ч
7. Тип массажера: воздушно-компрессионный, роликовый
8. Длина шнура USB Type-C: 1 м
9. Размер устройства: 171 × 273 × 132 мм
10. Размер упаковки: 320 × 210 × 154 мм
11. Вес нетто: 1,1 кг
12. Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его на более безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход массажера для рук из строя вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов или порошкообразных продуктов внутрь корпуса устройства, на органы управления, в разъем для зарядки, вентиляционные отверстия и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер для рук только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер для рук, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, в разъем для зарядки, вентиляционные отверстия и на шнур USB Type-C.
14. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. При зарядке обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
17. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от массажера.
18. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению».
21. Данное устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
22. Массажер для рук можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.
23. Не пытайтесь вынуть руку во время массажа, сначала остановите массаж, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Когда воздух будет спущен, вы легко освободите руку.

24. Перед использованием прибора снимите все аксессуары: кольца, часы, браслеты. Убедитесь, что кожа рук чистая, или используйте одноразовые целлофановые перчатки.
25. Не используйте массажер для рук во время занятий, требующих высокой концентрации внимания и быстрой реакции, например во время управления транспортным средством.

IM-1

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru