


**Удовольствие
в заботе!**

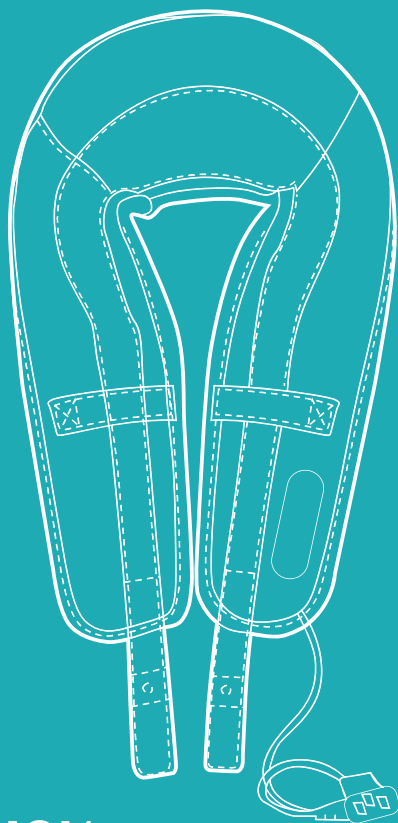

**Массажер для шеи
KT-5957**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажера для шеи	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Массажер для шеи КТ-5957 выполняет массаж шеи постукиваниями, как перкуссионный массажер, воздействуя на мышцы шейно-воротниковой зоны. Перкуссионный массаж стимулирует и повышает тонус мышц шеи, расслабляет и снимает усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшает циркуляцию крови. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто долго работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи.

Также массажер КТ-5957 можно использовать для массажа мышц в других зонах. Избегайте воздействия на кости, лицо, сердечную область, области лимфоузлов: подмышки, области под коленями, паховую область.

Управлять массажером очень просто. Массажер включается в автоматическом режиме. У массажера есть еще 39 режимов работы с различной частотой воздействия и 15 интенсивностей массажа. Благодаря наличию 40 режимов работы и 15 интенсивностей массажа вы точно подберете массаж, который подходит вам лучше всего.

Рекомендуемая продолжительность сеанса массажа составляет 15 минут. Через 15 минут массажер автоматически отключается. Не используйте массажер на одной зоне более одного раза подряд и более двух раз в день.


Однако следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для шеи КТ-5957 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо заболеваний, травм, повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажер — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для шеи

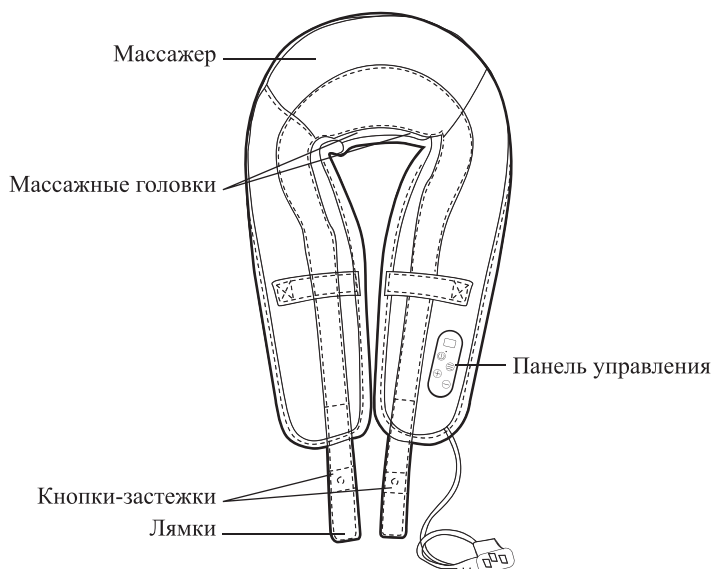

Панель управления

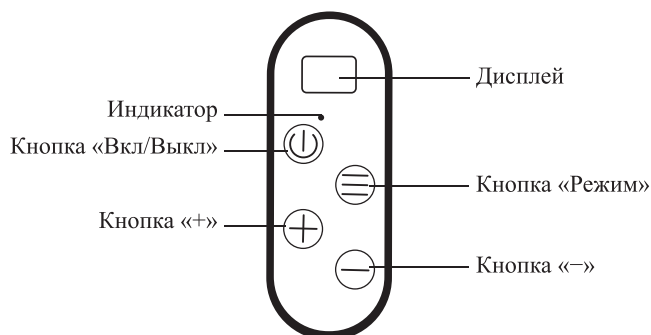

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажер. Массажер включается в автоматическом режиме. Через 15 минут массажер автоматически отключается.

Кнопка «Режим» циклически переключает 39 режимов и автоматический режим.

Кнопки «+» и «-» увеличивают и уменьшают интенсивность массажа соответственно.

На **дисплее** во время массажа отображается оставшееся время работы массажера, при выборе режима — номер выбранного режима (1–39 или «AU» в автоматическом режиме), при выборе интенсивности массажа — выбранная интенсивность (1–15). Когда массажер выключен, на дисплее мигает надпись «OF».

Индикатор горит, когда массажер подключен к сети.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите массажер мягкой тканью.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности, при наличии имплантов, пластин и электронных устройств (например, кардиостимуляторов).
2. Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.
3. Подключите массажер к сети.
4. Наденьте массажер на шейно-воротниковую зону. Примите удобное положение, шея не должна быть напряжена. Чтобы массажер не спал во время массажа застегните кнопки-застежки на лямках.

Примечание. Вы можете использовать массажер для выполнения массажа мышц в других зонах. Избегайте воздействия на кости, лицо, сердечную область, области лимфоузлов: подмышки, области под коленями, паховую область.

5. Чтобы включить массажер, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Массажер включится в автоматическом режиме, на дисплее будет отображаться надпись «AU». Интенсивность массажа в автоматическом режиме по умолчанию — 8.
6. Выберите интенсивность воздействия при помощи кнопок «+» и «-». Если вы только начинаете пользоваться массажером, устанавливайте невысокую интенсивность массажа. Проследите за реакцией организма на массаж. После нескольких процедур массажа на небольшой интенсивности вы можете увеличивать ее, ориентируясь на свои ощущения. Массаж не должен доставлять дискомфорт или болезненные ощущения.
7. Чтобы изменить режим работы массажера, нажимайте на кнопку «Режим».
8. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут. По истечении 15 минут массажер автоматически отключается. Если вы хотите отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
9. Отключите массажер от сети и протрите его мягкой тканью.

Примечание. При возникновении неприятных ощущений прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом. Также не используйте массажер 2 раза подряд для одной и той же зоны. Если вы хотите использовать массажер повторно для другой зоны, подождите 15–30 минут, чтобы массажер не перегревался.

Меры предосторожности по применению

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Существует ряд противопоказаний к применению:

- беременность;
- варикозное расширение вен, тромбофлебит;
- наличие имплантов, пластин;
- нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
- нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
- наличие кожных заболеваний;
- обострение хронических заболеваний;
- онкология;
- травмы, переломы;
- остеопороз;
- наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
- недавняя операция или ввод инъекций;
- гипертония;
- грипп, ОРВИ, повышение температуры;
- почечная недостаточность;
- сахарный диабет;
- гипогликемия;
- слабость, нервозность;
- переутомление.

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Время проведения массажа зависит от ощущений человека, в среднем 15 минут. Не рекомендуется использовать массажер на одной зоне дольше 15 минут.

Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются устанавливать высокую интенсивность массажа. В противном случае во время массажа вы можете испытывать неприятные ощущения или на следующий день на теле могут появиться гематомы и болевые ощущения в мышцах.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки массажера допускается использовать влажные салфетки, ткань или губку, смоченные в мыльном растворе. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер. Не допускайте попадания жидкости внутрь массажера, на панель управления и шнур.

Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор и дисплей не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Слишком высокая или низкая интенсивность массажа

Возможная причина	Решение
При включении массажера выбран автоматический режим и интенсивность массажа 8	Вы можете выбрать интенсивность массажа от 1 до 15 в любом режиме при помощи кнопок «+» и «-». Настройте массажер так, чтобы массаж был наиболее приятным и комфортным

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 60 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Автоотключение: через 15 минут
5. Тип массажера: перкуссионный
6. Длина шнура: 1,4 м
7. Размер устройства: 360 × 115 × 650 мм
8. Размер упаковки: 360 × 115 × 210 мм
9. Вес нетто: 2,0 кг
10. Вес брутто: 2,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера для шеи вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь массажера, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru