

Время для себя!



**Массажер для шеи
КТ-5962**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажера для шеи	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Мобильное приложение Kitfort	13

Общие сведения

Массажер для шеи КТ-5962 выполняет массаж шеи, воздействуя на мышцы шейно-воротниковой зоны массажными роликами. Роликовый массаж повышает тонус мышц шеи, расслабляет и снимает усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшает циркуляцию крови. Благодаря нагреву эффективность массажа повышается, достигается лучшее расслабление мышц шеи. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто долго работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи.

Управлять массажером очень просто. В устройстве предусмотрено три режима массажа: медленный, быстрый и комбинированный. Можно выбрать сильный или слабый нагрев или выключить его. Благодаря этому вы подберете массаж, который подходит вам лучше всего. На массажере предусмотрены петли, за которые его удобно держать.

Массажер оснащен голосовым сопровождением: при нажатии на кнопки, низком уровне заряда аккумулятора и выключении будут звучать соответствующие команды.

Рекомендуемая продолжительность сеанса массажа составляет 10 минут. Через 10 минут массажер автоматически выключается. Массажер можно использовать не более 20 минут подряд и не более двух раз в день.

Для зарядки аккумулятора используется комплектный шнур USB Type-C, который присоединяется к блоку питания с выходными параметрами $\approx 5\text{ В}$, 2 А (в комплект не входит) или к стороннему источнику питания (ноутбуку или пауэрбанку). При полном заряде аккумулятора время работы устройства составляет 1,5–2 часа.

За счет небольшого веса и работы от аккумулятора массажер для шеи КТ-5962 можно использовать в любом удобном для вас месте и брать с собой в поездки.

Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.


Массажер для шеи КТ-5962 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях.

Комплектация

1. Массажер для шеи — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для шеи

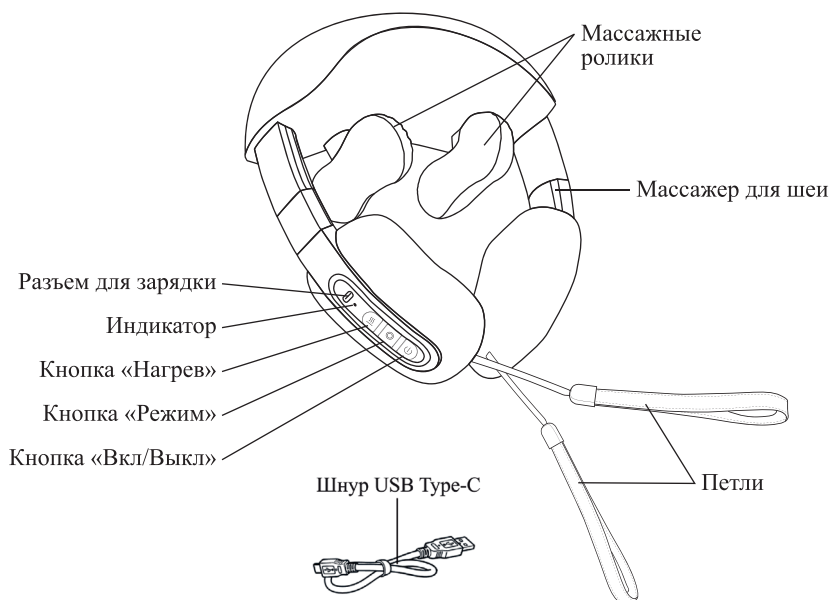

Кнопку «Вкл/Выкл» нужно нажать и удерживать для включения и выключения массажера. Массажер включается в обычном режиме со слабым нагревом. Через 10 минут массажер выключается автоматически.

Индикатор непрерывно горит синим во время работы массажера и красным во время зарядки аккумулятора. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор загорится синим непрерывно. Если во время работы индикатор горит красным непрерывно, это значит, что аккумулятор необходимо зарядить.

Кнопка «Режим» циклически переключает 3 режима роликового массажа: медленный, быстрый и комбинированный. В режиме быстрого массажа массажные ролики вращаются быстрее, чем в режиме медленного массажа, поэтому воздействие будет более интенсивным. В режиме комбинированного массажа непрерывное медленное вращение роликов чередуется с их прерывистым движением (вращение с короткими остановками). При переключении режимов индикатор несколько раз мигает синим.

Кнопка «Нагрев» включает и выключает нагрев, а также переключает сильный и слабый нагрев. По умолчанию включен слабый нагрев, первое нажатие на кнопку «Нагрев» включает сильный нагрев, второе нажатие на данную кнопку выключает нагрев. Чтобы включить слабый нагрев, необходимо нажать на кнопку «Нагрев» третий раз. При переключении степени нагрева индикатор несколько раз мигает розовым, при выключении нагрева индикатор несколько раз мигает синим.

Нажатия на кнопки сопровождаются голосовыми командами.

На массажере предусмотрены **петли**, за которые его удобно держать.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер для шеи из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите массажер мягкой тканью. Не помещайте массажер в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на органы управления, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.

Перед первым применением ознакомьтесь со всеми рекомендациями и противопоказаниями к применению устройства из раздела «Меры предосторожности по применению».

Перед использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка массажера

Установите массажер для шеи на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола. Подключите шнур USB Type-C к разъему для зарядки, а затем к источнику питания. Для зарядки устройства используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 2 А (в комплект не входит). Также вы можете заряжать устройство через компьютер или пауэрбанк.

Если во время работы индикатор горит красным, аккумулятор необходимо зарядить. Аккумулятор можно заряжать с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Время полной зарядки составляет 3 часа. Во время зарядки индикатор горит красным. Когда индикатор будет гореть синим непрерывно, это значит, что аккумулятор полностью заряжен.

Внимание! Во время зарядки устройство нельзя включить.

После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С. Если устройство транспортировалось при отрицательных температурах, то перед зарядкой следует подождать, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

Храните прибор при температуре от 0 до 40 °С. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его наполовину каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению».
2. Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.
3. Наденьте массажер на шейно-воротниковую зону. Примите удобное положение, шея не должна быть напряжена. Держите массажер за петлю.

Внимание! Не используйте массажер для шеи во время занятий, требующих высокой концентрации внимания и быстрой реакции, например во время управления транспортным средством.

4. Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл». Массажер включится в режиме медленного массажа со слабым нагревом. Ролики будут вращаться, индикатор будет гореть синим.
5. Чтобы изменить режим, нажимайте на кнопку «Режим». При изменении режима индикатор несколько раз мигнет синим. В режиме быстрого массажа массажные ролики вращаются быстрее, чем в режиме медленного массажа, поэтому воздействие будет более интенсивным. В режиме комбинированного массажа непрерывное медленное вращение роликов чередуется с их прерывистым движением (вращение с короткими остановками).
6. Чтобы включить сильный нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев», индикатор несколько раз мигнет розовым. Чтобы выключить нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев» еще раз индикатор несколько раз мигнет синим. Следующее нажатие на данную кнопку включит слабый нагрев, индикатор несколько раз мигнет розовым.
Примечание. Нагрев будет ощущаться с внутренней стороны массажных роликов. Потребуется подождать несколько минут, прежде чем вы ощутите заметное повышение температуры.
7. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 10 минут. По истечении 10 минут массажер автоматически выключается. Если вы хотите выключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор погаснет. Ролики остановятся через несколько секунд после нажатия на данную кнопку.

Внимание! При возникновении неприятных ощущений немедленно прекратите массаж. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Используйте массажер не более 20 минут подряд и не более двух раз в день.

После 10 минут работы необходимо сделать перерыв на 5 минут перед повторным использованием, чтобы массажер не перегревался.

Меры предосторожности по применению

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Существует ряд противопоказаний к применению:

- беременность;
- варикозное расширение вен, тромбофлебит;
- наличие имплантов, пластин;
- нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
- нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
- наличие кожных заболеваний;
- обострение хронических заболеваний;
- онкология;
- травмы, переломы;
- остеопороз;

- наличие электронных устройств при заболевании сердца, например кардиостимулятора;
- недавняя операция или ввод инъекций;
- гипертония;
- грипп, ОРВИ, повышение температуры;
- почечная недостаточность;
- сахарный диабет;
- гипогликемия;
- слабость, нервозность;
- переутомление.

Не прижимайте массажер к шее слишком сильно.

Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или слегка влажной мягкой тканью. Для чистки тканевой поверхности массажера допускается использовать влажные салфетки, ткань или губку, смоченные в мыльном растворе. Не используйте жесткие губки и абразивные моющие средства. Не помещайте массажер для шеи в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкости внутрь массажера, на органы управления, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C..

Уход и хранение

Храните устройство при температуре от 0 до 40 °C в сухом месте, недоступном для детей.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. На длительное хранение уберите массажер для шеи в пакет или коробку для защиты от пыли.

При длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости аккумулятора. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 1,5 часов. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и выйти из строя.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда аккумулятора	Зарядите аккумулятор, как описано в главе «Зарядка аккумулятора»
Возможная причина	Решение
Для включения массажера используется «Вкл/Выкл»	Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл»

Массажер для шеи выключился во время работы

Возможная причина	Решение
Массажер выключился автоматически по истечении 10 минут	При необходимости включите устройство снова
Аккумулятор разрядился	Зарядите аккумулятор, как описано в главе «Зарядка аккумулятора»

Аккумулятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 2 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 1,5 А*ч (11,1 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Тип массажера: роликовый
6. Время зарядки: 3 ч
7. Время работы: 1,5–2 ч
8. Длина шнура USB Type-C: 0,7 м
9. Размер устройства: 220 × 225 × 85 мм
10. Размер упаковки: 245 × 254 × 95 мм
11. Вес нетто: 0,8 кг
12. Вес брутто: 1,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажера или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход массажера для шеи из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь массажера, на органы управления, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер для шеи только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер для шеи, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на органы управления, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.
14. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. При зарядке обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
17. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от массажера.
18. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

20. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с главой «Меры предосторожности по применению».
21. Данное устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
22. Массажер для шеи можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи и травм.
23. Перед использованием прибора убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды.
24. Не используйте массажер для шеи во время занятий, требующих высокой концентрации внимания и быстрой реакции, например во время управления транспортным средством.
25. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.
26. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 10 минут. По истечении 10 минут массажер автоматически выключается. Используйте массажер не более 20 минут подряд и не более двух раз в день.
27. После 10 минут работы необходимо сделать перерыв на 5 минут перед повторным использованием, чтобы массажер не перегревался.

IM-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

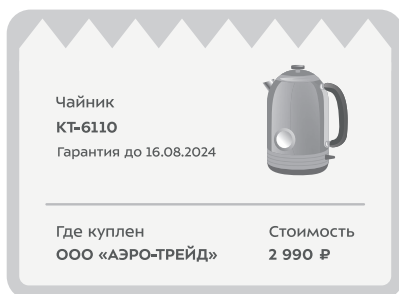

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru