

**С заботой
о твоём
теле!**



**Массажер
КТ-5960**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Массажер КТ-5960 поможет избавиться от мышечной усталости, боли и спазмов. Использование массажера помогает в борьбе с лишним весом и целлюлитом, делает кожу более упругой и подтянутой.

Вращательные и вибрационные движения насадки улучшают кровообращение и лимфоток, а также способствуют насыщению крови кислородом и выведению токсинов из организма. Воздействие насадки на проблемные участки тела приводит к сжиганию жира за счет ускорения метаболизма. Но важно помнить, что в борьбе с лишним весом и целлюлитом важен комплексный подход. Для максимального результата массаж необходимо сочетать с физической активностью и правильным питанием.

Массаж воздействует на глубокие слои кожи, стимулируя обновление всех уровней кожного покрова. Благодаря этому повышается эластичность связок и подвижность суставов.

Проведение массажа повышает тонус мышц, расслабляет и снимает усталость, напряжение и болевые ощущения, которые могут возникнуть после долгого сидения за компьютером, из-за неудобной позы во время сна или при сидячем образе жизни.

Прибор предназначен для проведения ротационного массажа различных частей тела. Набор насадок обеспечивает универсальность использования устройства — можно проработать все проблемные места шеи, рук, плеч, живота, икроножных мышц, бедер и спины.

Насадки легко отсоединяются и очищаются, поэтому для улучшения эффекта от массажа процедуру можно проводить с использованием антицеллюлитных кремов и лосьонов, а также массажных масел. Плавная регулировка интенсивности позволяет подобрать наиболее комфортную скорость вращения насадки.


Модель КТ-5960 имеет удобную форму и ручку, что способствует комфортному проведению самомассажа. Массажер может использоваться спортсменами до, во время и после тренировок, поможет расслабить мышцы спины и шеи офисным работникам.

Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Роликовая насадка — 1 шт.
3. Шариковая насадка — 1 шт.
4. Пальчиковая насадка — 1 шт.
5. Волнообразная насадка — 1 шт.
6. Насадка-губка — 1 шт.
7. Тканевая насадка — 3 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера

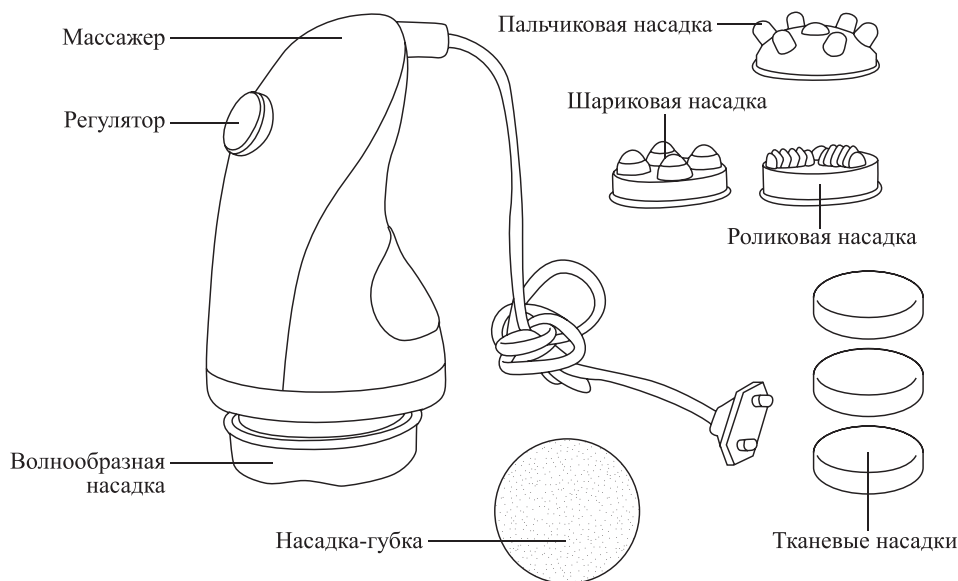

Регулятор включает и выключает массажер, а также плавно меняет скорость вращения насадки для выбора интенсивности массажа. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы включить и увеличить скорость вращения насадки (интенсивность массажа), и против часовой стрелки, чтобы уменьшить скорость вращения насадки (интенсивность массажа) и выключить устройство.

Насадки

Волнообразная насадка имитирует разминающий массаж, выполняемый ладонью. Использование насадки тонизирует и улучшает циркуляцию крови.

Роликовая насадка предназначена для комплексной проработки жировой прослойки. Насадка используется для борьбы с лишним весом и целлюлитом.

Пальчиковая насадка имитирует массаж, выполняемый пальцами. Она стимулирует приток крови, тонизирует мышцы, выполняет лимфодренажный массаж. Данная насадка также используется для проведения антицеллюлитного массажа и массажа стоп.

Шариковая насадка подходит для деликатных зон, таких как шея и живот. Улучшает кровообращение, придает коже упругость, выводит локализованные токсины и улучшает работу кишечника при проведении массажа живота.

Насадка-губка используется с **тканевыми насадками** для проведения расслабляющего массажа с использованием косметических средств.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство и насадки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Протрите насадки: их можно протереть ватным диском, смоченным в 75% растворе спирта или в хлоргексидине, тканевые насадки помойте в теплой воде с мылом.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделами «Советы» и «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
2. Снимите украшения (цепочки, браслеты, длинные серьги) и соберите волосы, чтобы они случайно не попали во вращающиеся части массажера. Если вы проводите массаж через одежду, то убедитесь, что в зоне массажа нет посторонних предметов: молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.
3. Кожа должна быть чистой. При желании нанесите на кожу косметические средства для достижения лучшего эффекта от массажа (антицеллюлитный крем, массажное масло и пр.).

4. Установите одну из насадок до упора на вращающийся диск прибора.

Примечание. Устанавливайте и снимайте насадку, только когда устройство отключено от сети питания.

5. Убедитесь, что регулятор повернут против часовой стрелки до упора. Подключите устройство к сети электропитания.
6. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы включить устройство и изменить интенсивность массажа (скорость вращения насадки).

Внимание! Если вы только начинаете пользоваться массажером, устанавливайте минимальную интенсивность. Проследите за реакцией организма на массаж. Возможна небольшая мышечная боль после массажа, сравнимая с болью в мышцах после тренировки. После нескольких процедур массажа на небольшой скорости вы можете попробовать увеличить скорость.

7. Приложите насадку к области тела, на которой собираетесь производить массаж. Перемещайте массажер по поверхности тела плавными круговыми движениями, следуя направлению массажных линий, не надавливая на массажер. Массаж каждой зоны должен длиться от 15 до 60 секунд, а общее время процедуры — не более 15 минут.
8. Поверните регулятор против часовой стрелки до упора, чтобы выключить массажер.
9. Отключите устройство от сети питания.
10. После каждого использования массажера мойте насадки в теплой воде с мылом.

Внимание! Не используйте массажер в области сердца, на лице и голове, передней поверхности шеи, костных выступах, точках пульсации, непосредственно на позвоночнике, суставах, лимфоузлах и слизистых оболочках.

Не давите слишком сильно на кожу во время массажа. При дискомфорте во время массажа прекратите процедуру и обратитесь к врачу. Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу. Если у вас хрупкие сосуды, будьте осторожны при использовании массажером и перед полноценным массажем проследите за реакцией кожи и сосудов.

Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью: ванной, бане и сауне. Следите, чтобы кожа была сухой, берите массажер только сухими руками.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Не используйте массажер перед сном.
4. Используйте массажер не менее чем через час после приема пищи.
5. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств при заболеваниях сердца, например, кардиостимулятора;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышение температуры;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.
6. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Советы

Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Увеличивайте интенсивность массажа постепенно. Время проведения массажа зависит от ощущений человека, в среднем от 3 до 15 минут. Каждый сеанс должен длиться не более 15 минут.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться гематомы и болевые ощущения в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

Вы можете проводить процедуру самостоятельно или воспользоваться помощью другого человека.

Мышцы массируемого участка тела должны быть полностью расслаблены во время проведения массажа.

Массаж следует начинать с больших зон, постепенно переходя к небольшим зонам. Направление движения прибора при массаже разных частей тела:

- спина: от линии позвоночника к бокам;
- шея: от головы к спине;
- руки: от кистей рук к локтевым суставам, от локтевых суставов в сторону плечевых суставов;
- живот: по часовой стрелке;
- бедра и голени: вертикальные движения снизу-вверх;

Внимание! Никогда не проводите массаж непосредственно по позвоночнику!

Внимание! Никогда не проводите массаж внутренней стороны бедра, не проконсультировавшись с врачом! По внутренней поверхности бедра проходят основные вены, идущие от таза к ногам. Если неправильно воздействовать на лимфоузлы, это может привести к нарушению лимфотока и застою венозной крови.

- ягодицы: чередование вертикальных и круговых движений.

Чистка и обслуживание

Протирайте устройство и насадки мягкой влажной, а затем сухой тканью. Не используйте агрессивные моющие средства.

Для дезинфекции насадок их можно протереть ватным диском, смоченным в 75% растворе спирта или в хлоргексидине. Также все насадки можно мыть в воде с мылом. Будьте осторожны при очищении тканевых насадок, чтобы не повредить их.

Чистку следует производить после каждого использования, т.к. влага, кожный жир и пот могут привести к повреждению поверхности насадок.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадание жидкостей внутрь корпуса устройства, на шнур питания, регулятор скорости и переключатель.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении рекомендуется убрать массажер и насадки в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Массажер не работает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажер не включен	Переведите переключатель в среднее или верхнее положение

Массажер нагрелся

Возможная причина	Решение
Устройство работало долгое время без перерыва	Выключите массажер, отключите его от источника питания и дайте ему остыть 30 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 25 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Тип массажера: ротационный
5. Скорость вращения насадки: 1950–2990 об/мин
6. Длина шнура: 1,8 м
7. Размер устройства: 95 × 95 × 170 мм
8. Размер упаковки: 263 × 105 × 238 мм
9. Вес нетто: 0,8 кг
10. Вес брутто: 1,1 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус устройства, на шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Массажер не предназначен для общественного использования, применения в медицинских учреждениях.
3. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

4. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не переносите массажер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на шнур питания и органы управления.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Не подносите включенный прибор к области сердца, лицу и голове, передней поверхности шеи, к точкам пульсации, костным выступам, непосредственно к позвоночнику, суставам и слизистым оболочкам.
18. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделами «Советы» и «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
19. Данное устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru