



СисЭс МЕДИКА

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Электрическая звучовая зубная щетка CS Medica KIDS CS-9190-F, CS-9190-H

*Благодарим Вас  
за приобретение  
зубной щетки  
CS Medica KIDS CS-9190*



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации. При покупке требуется правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

Данная зубная щетка предназначена для проведения гигиенической полости рта у детей от 3 лет.

#### 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



**Предупреждение:**  
Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к серьезной травме.

- Зубная щетка не является игрушкой и содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены ребенком. Храните ее в недоступном для детей месте.
- Вне зависимости от степени участия взрослых в процессе чистки зубов ребенка, данная процедура должна всегда проводиться под контролем взрослых.
- Рекомендованный возраст для пользования данной зубной щеткой – от 3 лет.
- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства, если к Вам относится что-либо из нижеперечисленного:
  - чувствительные зубы или десны;
  - недавно перенесенная стоматологическая хирургическая операция;
  - прохождение курса лечения, связанного с проблемами в ротовой полости.
- Прекратите использовать устройство и проконсультируйтесь со своим стоматологом, если у Вас наблюдается сильная кровоточивость десен после недели пользования данной зубной щеткой.
- При выборе зубной пасты рекомендуется проконсультироваться со своим стоматологом. Детям не рекомендуется использование пасты с содержанием абразивных веществ.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Храните щетку в недоступном для детей месте. Зубная щетка содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены детьми.



**Внимание:**  
Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к незначительной травме, травме средней тяжести или порче имущества.

- Данное устройство предназначено только для ухода за полостью рта человека в домашних условиях.
- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область в течение продолжительного времени.
- Не используйте элементы питания, не указанные для данного устройства. Вставляйте элемент питания, соблюдая полярность.
- Извлеките элемент питания из зубной щетки, если Вы не собираетесь пользоваться ею в течение длительного времени (от трех и более месяцев).
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить поверхность кнопки.

#### 2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА




Дополнительно можно приобрести: насадки CS Medica SP-190-F/SP-190-H для электрической звуковозвучивающей зубной щетки CS-9190 (в комплекте 2 насадки).

#### 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Звучовая частота для эффективной чистки (18000 движений в минуту)
- Яркий дизайн со сказочными персонажами
- 2 насадки в комплекте

#### 4. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

- Выключите прибор. Чтобы открыть крышку батарейного отсека, удерживая рукоятку в одной руке, возьмитесь большим и указательным пальцами за крышку батарейного отсека и потяните ее вниз.

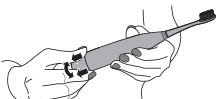

- Установите алкалиновую (щелочную) батарею типа AA таким образом, чтобы положительный (+) и отрицательный (-) контакты совпадали с полярностью, указанной в отсеке для элемента питания.

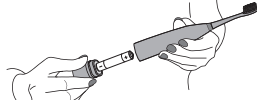


- Закройте крышку, совместив направляющие на крышке батарейного отсека и рукоятку.

**Примечание:**  
Если отсек для элемента питания закрыт плотно, в корпус устройства может попасть вода и вызвать нарушения в работе зубной щетки.

- Срок службы элемента питания зависит от его модели, времени использования, силы, прилагаемой во время чистки, и иных факторов. Заменяйте батарею, когда движения щетки станут более слабыми.
- Время работы от одной алкалиновой (щелочной) батареи составляет около 60 дней при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты. Так как прилагаемая батарея рассчитана для демонстрационных целей, она может проработать менее 60 дней.
- Рекомендуем использовать алкалиновые (щелочные) элементы питания типа AA.

#### 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

Установите насадку на рукоятку, совместив направляющие на насадке и рукоятке, и поверните ее по часовой стрелке до упора, как показано на рисунке. Чтобы снять насадку, поверните ее против часовой стрелки и потяните ее от себя.

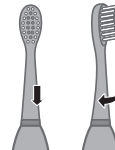


#### 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Смочите щетку водой и выдавите на нее немного зубной пасты. После этого поместите щетку в ротовую полость.


**Примечание:**  
Чтобы предотвратить раздражение зубной пасты, включайте и выключайте зубную щетку только при ее нахождении во рту.

- Включите питание, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Головка щетки начнет вращаться. Аккуратно касайтесь зубов и десен щетинками, медленно перемещая головку щетки по зубам в горизонтальном направлении, последовательно проводя чистку всей поверхности зубов.


Правильная чистка зубов:

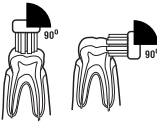

Поверхность зуба и окклюзионная поверхность: щетки держите щетинками под углом 90° к поверхности зуба.

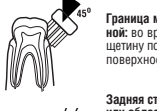

Граница между зубами и десной: во время чистки держите щетину под углом 45° к поверхности зуба.

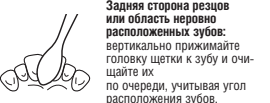

Задняя сторона режущей или область неровно расположенных зубов: вертикально прижимайте головку щетки к зубу и очищайте их по очереди, учитывая угол расположения зубов.

- Завершив чистку зубов, не вынимая щетку из рта, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить зубную щетку.

- Промойте головку щетки под проточной водой. Аккуратно стряхните излишек воды.

#### 7. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Содержите зубную щетку в чистоте.
- Удаляйте загрязнения с корпуса щетки мягкой сухой тканью. При необходимости смачивайте ткань в воде или мягком моющем средстве. Загрязненную поверхность также можно смочить водой, а затем протереть тканью.
- Несмотря на то, что щетка является водонепроницаемой, не погружайте ее в воду на длительное время.
- Не используйте для очистки летучие органические соединения, такие как бензин и растворитель. Это может повредить поверхность крышки или привести к повреждению устройства.
- После каждого использования промывайте щетину водой.
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Храните щетку в недоступном для детей месте.
- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Заменяйте насадку для щетки не реже одного раза в три месяца.

#### 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрическая звуковозвучивающая зубная щетка CS Medica KIDS
Модель	CS-9190-F, CS-9190-H
Потребляемая мощность	1,2 Вт
Источник питания	1 алкалиновый (щелочной) элемент питания типа AA
Время работы от одного элемента питания	Около 60 дней (при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 мин)
Частота колебаний в минуту	18 000
Условия эксплуатации:	температура от 0 до 50°C относительная влажность от 0 до 90%
Условия хранения и транспортирования:	температура от -10 до 50°C относительная влажность от 10 до 50% атмосферное давление от 70 до 106 кПа
Масса	52 г
Габаритные размеры	190,5 x 29,1 x 27,5 мм
Срок службы	Ручка (электронный блок) – 2 года, Насадка – 3 месяца. Элементы питания – устанавливаются производителем этих элементов.
Комплект поставки	Ручка (электронный блок) с насадкой, дополнительная насадка, алкалиновый элемент питания типа AA, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном



Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза



Степень защиты корпуса зубной щетки от проникновения твердых предметов и воды



Температурный диапазон / Диапазон влажности / Ограничение атмосферного давления



Возможности утилизации использованной упаковки. XX – цифровое обозначение материала упаковки. YYYYY – буквенное обозначение материала упаковки

- 03 Поливинилхлорид
- 22 Бумага
- PAP Бумага
- PVC Поливинилхлорид

#### 9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства зашифрована в серийном номере, который расположен на упаковке прибора и имеет структуру YMMNNNN. где YY обозначает последние две цифры года производства, M – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNNN – порядковый номер изделия, а также в ПОТ номер, который расположен в отсеке для элементов питания и имеет структуру YMMNN. где YY обозначает последние две цифры года производства, M – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNN – номер партии.

#### 10. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если зубная щетка перестала работать, возможно, батарейка разрядилась. В случае если даже после замены батарейки зубная щетка не работает, не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. Обратитесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания (адрес центров технического обслуживания указаны в конце данного руководства).

Проблема	Возможная причина	Способ решения
Зубная щетка не включается	Элемент питания исчерпан силой ресурс	Установить новый элемент питания (см. п. 4)
Колебания щетины слишком отщущают, слишком медленные и слабые	Вы слишком сильно прижимаете щетину к поверхности зубов	Во время чистки слегка касайтесь щетиной поверхности зубов



Надлежащая утилизация продукта (отработанные электрические и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами по окончании своего срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отнесите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для максимального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.

По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть батареи для экологически безопасной переработки.

#### 11. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.014.R.002710.06.21 от 14.06.2021. Срок действия до 14.06.2026

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.78899/21 от 06.07.2021. Срок действия до 22.06.2026

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.08799/21 от 16.07.2021. Срок действия до 15.07.2026

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Сроки гарантии:**  
**Рукоятка**  
**(электронный блок) – 2 года**  
**Насадка – 3 месяца**



Произведено по заказу и под контролем ООО «СиЭС Медика», импортера и уполномоченного представителя производителя, официального представителя торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза

Модель

Серийный номер

Дата продажи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Подпись продавца

Штамп магазина

С условием гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил.

Подпись покупателя

Дата обращения

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Заключение мастера, выполненные работы

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Подпись и штамп мастера

Работу принял

(подпись клиента)

• Владивосток, ООО «СиЭС Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru

• Владимир, ООО «СиЭС Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru

• Волгоград, ООО «СиЭС Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф. 24, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru

• Вологда, ООО «СиЭС Медика Вологда», Советский пр-т., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru

• Воронеж, Офис «СиЭС Медика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76, voronezh@csmedica.vrn.ru  
Сервисно-консультационный центр, ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11, тел.: (473) 232-03-58, (473) 255-08-71, (910) 732-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru

• Екатеринбург, Офис ООО «СиЭС Медика Урал», ул. Тургнева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, region66@csmedica.ru  
Сервисно-консультационный центр, ул. Тургнева, д. 30А, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service66@csmedica.ru

• Иваново, ООО «СиЭС Медика Ярославль», ул. Степанова, дом 5, оф. 105, (4932) 26-76-90, 26-76-10, csmedica-ivanovo@mail.ru

• Ижевск, ООО «СиЭС Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru

• Иркутск, ООО «СиЭС Медика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74, (3952) 43-69-65 office38@csmedica.ru

• Йошкар-Ола, ООО « СиЭС Медика Чебоксары», пр-т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, cs@mar-el.ru

• Казань, ООО «СиЭС Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru  
Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843)528-01-70, cskzn5@mail.ru

• Калининград, ООО «СиЭС Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49е, оф. 206, тел.: (4012) 95-38-65, 8 (963) 737-79-94, kaliningrad@csmedica.ru

• Калуга, ООО «СиЭС Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica\_kaluga@mail.ru

• Кемерово, ООО «СиЭС Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, kemetovo@csmedica.ru

• Киров, ООО «СиЭС Медика Вятка», Студенческий пр-т, д. 19, корп. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, cs43@mail.ru

• Кострома, ООО «СиЭС Медика Ярославль», пр-т Мира, д. 51, оф.7, тел.: (4942) 63-77-79, (4942) 55-28-73, csmedica-kostroma@mail.ru

• Краснодар, Офис ООО «СиЭС Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, ompon@kubannet.ru  
Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru

• Красноярск, ООО «СиЭС Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru

• Курск, ООО «СиЭС Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru

• Липецк, ООО «СиЭС Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsks@csmedica.ru

• Магнитогорск, ООО «СиЭС Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, mgn@csmedica.ru

• Махачкала, ООО «СиЭС Медика Махачкала», ул. Богатырева, д. 11а, корп. 119, подвезд № 5, тел.: (928) 941-00-20, director5@csmedica.ru

• Минеральные Воды, ООО «СиЭС Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 106, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedicakmv@mail.ru

• Мурманск, ООО «СиЭС Медика Карелия» (Петрозаводск), пр-т Кольский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 52-53-43, murmansk@csmedica.ru

• Набережные Челны, ООО «СиЭС Медика Казань», пр-т Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru

• Нижневартовск, ООО «СиЭС Медика Тюмень», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, моб.: (982) 970-32-23, nvk@csmedica.ru

• Нижний Новгород, ООО «СиЭС Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru

• Новокузнецк, ООО «СиЭС Медика Кемерово», пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (923) 464-05-18 novokuznetsk@csmedica.ru

• Новосибирск, ООО «СиЭС Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru

• Омск, ООО «СиЭС Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, csmedica\_omsk@mail.ru

• Орёл, ООО «СиЭС Медика Орел», ул. Московская, д.80, тел.: (4862) 54-24-00, orel@csmedica.ru

• Оренбург, ООО «СиЭС Медика Оренбург», ул. 8 Марта, 21 / ул. Правды, 22, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru

• Орехово-Зуево, ООО «СиЭС Медика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (499)504-43-28, csprodmoskovie@mail.ru

• Пенза, ООО «СиЭС Медика Пенза», ул. Калининна, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru

• Пермь, ООО «СиЭС Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, perm@csmedica.ru

• Петрозаводск, ООО «СиЭС Медика Карелия», ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru

• Псков, ООО «СиЭС Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, пом. 1001, тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru

• Россошь, ООО «СиЭС Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossosh@csmedica.ru

• Ростов-на-Дону, ООО «СиЭС Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85, (863) 231-03-86, (863) 231-04-85, (863) 231-04-86, (863) 231-07-87, rostov@csmedica.ru

• Рязань, ООО «СиЭС Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru

• Самара, Офис ООО «СиЭС Медика Самара», ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 405, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, samara@csmedica.ru  
Сервисно-консультационный центр, ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 406, тел.: (846) 254-14-19, csmedica-samara@sama.ru

• Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЭС Медика Северо-Запад», Малодетскоельскый пр-т, д. 36, тел.: (812) 467-46-26, csnw@csmedica.ru  
Сервисно-консультационный центр, Малодетскоельскый пр-т, д. 36, лит. Н, тел. (812) 409-40-30, spbservice@csmedica.ru

• Саранск, ООО «СиЭС Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru

• Саратов, ООО «СиЭС Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, saratov@csmedica.ru

• Саров, ООО «СиЭС Медика Поволжье» (Н. Новгород), пр-т Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, arz\_cs1@bk.ru, arz\_cs@bk.ru

• Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», ул. Жильцовоой, д. 4, пом.2, тел.: (978) 137-90-68, (978)137-90-68, director82@csmedica.ru

• Смоленск, ООО «СиЭС Медика Смоленск», ул.-2-я Линия Красноармейской Слободы, д. 5, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru

• Сочи, ООО «СиЭС Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61-57-65, cs\_medicasochi@mail.ru

• Старопоель, ООО «СиЭС Медика Старопоель», ул. Маршала Жукова, д. 7, оф.3 тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicavst@mail.ru

• Сургут, ООО «СиЭС Медика Тюмень», ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №2, тел.: (4922) 25-46-17, (922) 074-32-73 surgut@csmedica.ru

• Тамбов, ООО «СиЭС Медика Тамбов», ул. Ореховая, д. 10, пом. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru

• Тверь, ООО «СиЭС Медика Тверь», пр-т Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, (4822) 65-65-52, tver@csmedica.ru

• Тольятти, ООО «СиЭС Медика Самара», б-р Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, tt@csmedica.ru

• Томск, ООО «СиЭС Медика Томск», ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3, 2 этаж, тел.: (3822) 902-703, info\_tomsk@mail.ru

• Тула, ООО «СиЭС Медика Тула», ул. Демонстрация, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru

• Тюмень, ООО «СиЭС Медика Тюмень», ул. Амурская, д. 4, оф. 6, тел.: (3452) 34-22-70, (919) 944-10-11, cstymen@mail.ru

• Улан-Удэ, ООО «СиЭС Медика Иркутск», ул. Терешковой д. 26, пом. 23, тел.: (3012) 210-428, 210-378, csmedicabur@mail.ru

• Ульяновск, ООО «СиЭС Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uln@yandex.ru

• Уфа, ООО «СиЭС Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, пом.21-24, 30, тел.: 8(347) 200-09-03, 8-800-500-1105, csmedica.ufa@mail.ru

• Хабаровск, ООО «СиЭС Медика Дальний Восток и Забайкалье», ул. Владивостокская, д.16, оф. 116, тел.: (4212) 70-12-65, csmedica\_hab@mail.ru

• Чебоксары, ООО «СиЭС Медика Чебоксары», ул. Зингельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru

• Челябинск, ООО «СиЭС Медика Челябинск», ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica.ru

• Череповец, ООО «СиЭС Медика Вологда», пр-т Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 55-52-63, моб.:(921)834-78-65 csmedicaherepovets@rambler.ru

• Чита, ООО «СиЭС Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чкалова, д. 124, оф. 116, тел.: 8(3022) 21-05-05, 8(914) 368-56-05, csmedica-chita@mail.ru

• Шахты, ООО «СиЭС Медика Ростов-на-Дону», ул. Ионова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuht@csmedica.ru

• Ярославль, ООО «СиЭС Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 20-12-50, 73-11-82, 90-66-53 cs-ya76@yandex.ru