


Neck Massager

颈部按摩器

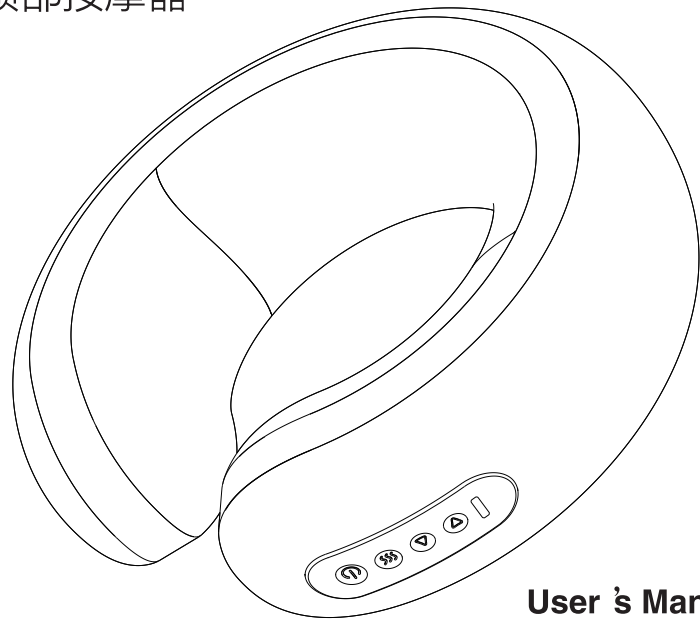

User's Manual


使用说明书



产品使用说明书

HT-PN031颈部按摩枕

产品部件

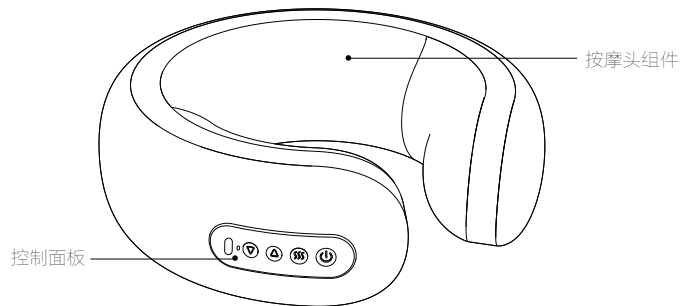

产品信息

产品名称: U型按摩枕

额定时间: 15min

额定电压: 7.4V

主机尺寸: 26x25x9cm

执行标准: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

产品型号: HT-PN031

电池容量: 2200mAh

额定功率: 6W

包装尺寸: 27x25.8x9.5cm

产品以实物为准, 感谢您购买本产品, 使用前请仔细阅读本说明书内容。

产品充电

当主机缺电时候, 可用Type-C线一端插入主机, 另一端插入带安卓头手机充电器 (输出当主机缺电时候是5V=1A/2A), 充电时红灯常亮, 充满时绿灯常亮充电。

充电


🔴 充电时, 红色常亮

🟢 充满电, 绿灯常亮

🟢 电量 > 20% 绿灯常亮

🔴 电量 < 20% 红灯闪烁

控制面板功能

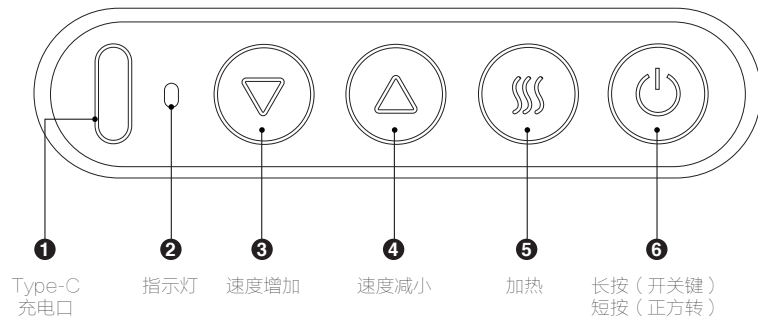

操作方式



1、开关键

长按开关键，（启动/关闭）按摩功能。开机后短按开光键，调节正反转按摩。



2、加热键

开机后短按加热键，（启动/关闭）加热功能



2、档位键（转速减小）

开机后短按档位键，降低按摩速度。



2、档位键（转速增加）

开机后短按档位键，增加按摩速度。

操作方式

- >建议每次按摩身体时间请勿超过15分钟。
- >若在按摩过程中感到不适请立即停止操作。
- >按摩器不用时，请将按摩仪停止工作，关闭机器。
- >若发生机器故障，请关掉总开关，以免发生意外。

注意事项

⚠ 危险

请绝对不要与以下的医用电子器械一起使用:

- 1.心脏起搏器等体内植入型医用电子器械;
 - 2.人工心肺等维持生命的医用电子器械;
 - 3.心电图仪等医用电子器械;
- 如果一起使用会造成这些医用电子器械产生误动作，可能会危及生命;
- 4.加油站、高粉尘车间、煤气等易燃易爆场所禁用。

⚠ 警告

使用中或使用后出现身体不适，停止使用，并咨询医生。

本产品含有锂电池，请勿自行拆卸、改装、水浸产品或投掷火中，否则可能导致产品损坏爆炸。

下列情形，请向医生咨询后使用。否则可能会发生事故或引起身体不适:

- 1.正在接受医生治疗、并感觉身体异常的患者。
- 2.心脏、脑神经异常的患者。
- 3.体温超过38度(发热期)的患者。
- 4.感染性疾病的患者。
- 5.皮肤知觉障碍或皮肤异常的患者。
- 6.正在服用药物的患者。
- 7.血压异常的患者。
- 8.不能自由表达自己意愿的患者。
- 9.由于糖尿病等造成高度末梢循环障碍而产生知觉障碍的患者。

注意事项

下列情形禁止使用

1. 恶性肿瘤患者;
2. 急性化脓性炎症患者;
3. 人体的心脏附近;
4. 有出血倾向的患者;
5. 心脏起搏器使用者;
6. 金属内置物患者;
7. 孕妇、产妇;

>请勿在心脏附近、颈部上方、头部、口腔、阴部或皮肤疾患等部位使用,且不能同时治疗双脚脚底。另外,使用时不要压迫内脏。否则可能会发生事故或引起身体不适。

>请勿与其他医疗器械或2台以上本产品一起使用,否则可能会引起恶心或身体不适。

>请勿用于使用说明书中所写的按摩以外的目的,否则可能会发生事故,产生故障。

>请勿擅自拆卸、修理和改造本产品,否则可能会导致故障或触电事故。

注意事项

! 注意

1. 如果因本产品异常而感到身体不适时,请立即停止使用。
2. 身体或皮肤如有异样的感觉,请向医生咨询并遵医嘱。
3. 发生不能运转的异常情况时,请立即切断电源并取下,否则可能会产生高温或短路,发生事故。同时联系客服售后咨询。
4. 请勿用湿手插拔充电线,否则可能会导致触电或发生事故。
5. 请勿给儿童或无表达意识能力的人使用,否则会引发事故或引起身体不适。

6. 请勿在浴室等湿度高的地方使用,或者边洗澡边使用产品,否则可能会受到强烈电击,并损坏产品。

7. 就寝时请勿使用,否则有可能使本体产生故障,另外按摩头有可能被移到其他部位而产生身体不适。

8. 驾驶汽车时请勿使用,否则可能因刺激过大引起身体不适,导致事故。

9. 请勿在同一部位长时间(30分钟以上)使用,否则可能使按摩部位肌肉疲劳引起身体不适。

10. 请正确佩戴本产品,用于颈椎部位,左右对称佩戴,否则可能会发生事故或引起身体不适。

11. 拔下充电线时,请勿拉拽导线,应握住导线插头拔出,否则可能导致触电或损坏产品。

12. 产品长时间工作时,表面会有发热的现象,这属于正常现象。

注意事项

! 建议

请确认主机按钮正常工作后方可使用。

初次使用时,或产品长时间搁置后电池电量损耗,请按照使用说明书进行充电操作,确保其能正常工作。

废弃本产品时,请依照城市有关环境保护规定进行处理,否则可能会造成环境污染。建议16周岁及以上的人群使用。

请勿在以下场所使用、存放本产品:

- 1 阳光直射的场所
- 2 高温多湿的场所
- 3 有水的场所
- 4 灰尘较多的场所
- 5 烟火附近
- 6 强电磁场所
- 7 容易受到振动冲击的场所

! 温馨提示

- >产品开机运行15分钟会自动关闭,建议每天使用不超过30分钟,每周按需使用。
- >本产品使用后应置于通风干燥处存放。
- >切勿将其它重物压在产品上面使用。
- >切勿用力拉充电口处的胶塞,否则容易导致断裂脱落。

疑问解答

若在使用产品时遇到问题,请参考下列几点提示及解决方式:

- >若产品仍处于故障状态或无法使用,请关掉电源。
- >使用者请勿自行拆卸或修理产品,自行拆卸或维修而导致产品损坏将造成产品保修失效,公司将不承担该情况所造成的任何后果。

| 状况 | 可能原因 / 处理方式 |
|-------------|--|
| 无法启动颈部按摩仪 | <ul style="list-style-type: none">•请确认电池是否电量不足。•请确认开关按摩按钮已按下。 |
| 不能充电或无充电灯显示 | <ul style="list-style-type: none">•请检查连接线和主机及手机电源适配器是否连接好。 |
| 按摩在进行当中忽然停止 | <ul style="list-style-type: none">•请检查电量是否不足。•自动定时装置所设定的15分钟时间已过。•若问题还存在,请勿继续使用并与公司维修服务中心联络。 |

清洁与保养

在清洁颈部按摩仪前,请务必断开电源,请勿用湿手碰触插头。

- 1.禁止靠近火源、油污、腐蚀性液体以及各种不利环境。
- 2.仅贴肤的外布套可单独拆卸清洗,按摩组件及控制面板等部分禁止沾水。
- 3.清洗前,必须按要求拆卸外布套,确保外布套与电路等不可清洗部分已完全分离。
- 4.外布套不可机洗,可轻柔手洗,且水温不能超过40度,不宜晾干及烘干,自然悬挂晾干。
- 5.外布套清洗完毕,必须待外布套彻底干透后才能安装其他部件,然后再开启使用。
- 6.产品请放在儿童触碰不到的地方
- 7.产品请勿放在阳光直射、高温、潮湿的地方保管。
- 8.产品请放在干燥、通风的地方保管。
- 9.产品请勿私自拆卸、维修、改造本产品,可能会引起故障。

产品废弃时注意事项

请支持充电式电池(锂离子电池)的循环使用。

! 危险

- 1.本品所用电池为专用充电式电池,不得用于其他产品,请勿对已取出的充电式电池进行充电。
- 2.请勿投入火中,使其过度受热。
- 3.请勿用钉子刺穿、重力冲击或进行分解改造。
- 4.请勿将电池正负极直接用金属连接。
- 5.请勿将其与项链、发卡等一起存放。
- 6.请勿在火炉边、烈日下等高温场所进行充电,使用和放置。
- 7.以上情形均可引起发热起火、破裂等现象。

⚠ 警告

1. 请将取下的充电线置于婴幼儿触及不到的地方以防止被误吞。
2. 若出现被误吞的情形时，请立即找医生诊治。
3. 当电池液泄漏时，请勿徒手接触液体，并按以下方法进行处理：
 - (1) 当电池液进入眼睛时，有造成失明的危险，请勿用手直接揉搓眼睛，需立即用清水洗净并找医生诊治；
 - (2) 当电池液沾在身体或衣物时，可能引起皮肤发炎或受伤，用清水冲洗，如仍有不适则需立即找医生诊治。
 - (3) 仅限产品在废弃之时可进行分解，若不遵守，可能导致火灾，触电，受伤等事故发生，若需修理(更换电池情形除外)时，请咨询你当初购买本产品的店铺。

本产品所用的离子电池是可回收再生的贵重资源，请在使用完毕废弃之时，将锂离子电池取出，交给可进行充电式电池回收再生处理的专业机构进行处理。

产品及零部件回收说明

回收提示性说明:

为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等处理。

产品中有毒有害物质名称及含量表

| 部件名称 | 有毒有害物质 | | | | |
|------|--------|-----|--------------|-------|-----------|
| | 铅Pb | 汞Hg | Cd 六价铬Cr(VI) | 多联PEB | 多溴二苯醚PBDE |
| 五金件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCB板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 海绵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 布料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

- :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
× :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注: (1) 以上表中未表明的，本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有毒物质。

(2) 以上表中含有害物质的所有部件及其均质材料，均符合中国RoHS对有毒有害物质限制使用的严格要求，请放心使用。

环保使用期限10年:


本产品的“环保使用年限”为10年，本企业根据产品设计特性制定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时“环保使用年限”才有效。



User's Manual

Neck massager

Product Components

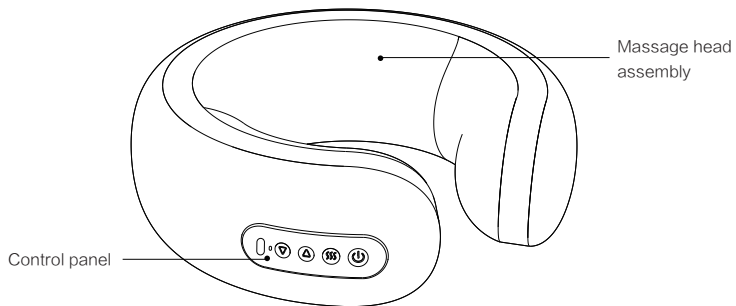

Product Information

Product Name: U-Shape Massage Pillow

Rated time: 15min

Rated voltage: 7.4V 

Host size: 27x25.8x9.5cm

Product model: HT-PN031

Battery capacity: 2200mAh


Rated power: 6W

Package size: 26x25x9cm

Applicable Standard: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008


The product is subject to the actual product. Thank you for purchasing this product. Please read this manual carefully before use.

Charging

When the massager is short of power, one end of Type-C cable can be inserted into the massager, and the other end can be inserted into the phone charger with Android head (the output is 5V 2A), red on charging, green after full charge.

- The red light would stay on throughout the charging process.
- The green light would stay on if the product is fully charged.
- The green light would stay on if the power is more than 20%.
- The red light would flash if the power is less than 20%.

Function of the Control Pane

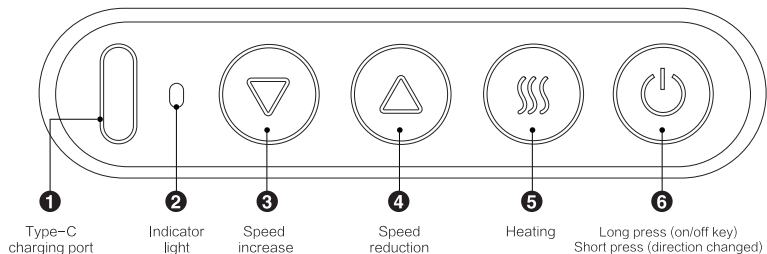

Operation method



1. Power key

Long press the power button to (start/stop) the massage function. Short press the button to adjust the forward and reverse massage.



2. Heating key

Short press the heating button after starting up, (start/stop) the heating function.



3. Gear key (speed reduction)

Short press the gear button after turning on the machine to reduce the massage speed.



2. Gear key (speed increase)

Short press the gear button after turning on the machine to increase the massage speed.

Attention:

- > It is recommended that the massage time not exceed 15 minutes.
- > Please power off the massager if you feel uncomfortable during the massaging process.
- > Please power off the massager if you do not need it.
- > If any malfunction occurs, please turn off the main switch to avoid accidents.

Precautions

⚠ Dangers

Please never use it with the following medical electronic devices:

1. Implantable medical electronic devices such as cardiac pacemakers;
2. Life-sustaining medical electronic devices such as artificial hearts and lungs;
3. Electrocardiograph and other medical electronic equipment;
If used together, these medical electronic devices will cause malfunction, which may be life-threatening;
4. Gas stations, high-dust workshops, gas and other flammable and explosive places are prohibited;

! Warnings

If you feel unwell during or after use, stop using it and consult a doctor. This product contains car batteries, please do not disassemble, modify, immerse the product in water or throw it into fire, otherwise the product may be damaged and explode.

Please consult your doctor if any of the following circumstances, otherwise, incidents may happen or you may suffer from physical discomfort:

1. Patients who are receiving medical treatment and feel abnormal in their bodies.
2. Patients with heart and cranial nerve abnormalities.
3. Patients whose body temperature exceeds 38 degrees (fever period).
4. Patients with infectious diseases.
5. Patients with impaired skin perception or skin abnormalities.
6. Patients who are taking drugs.
7. Patients with abnormal blood pressure.
8. Patients who cannot freely express their wishes.
9. Patients with sensory impairment due to high degree of peripheral circulatory disturbance caused by diabetes.

Precautions

It is forbidden to use in the following situations:

1. Patients with malignant tumors;
2. Patients with acute suppurative inflammation;
3. Near the heart of the human body;
4. Patients with bleeding tendency;
5. Pacemaker users;
6. Patients with metal implants;
7. Pregnant women and parturients;

>Do not use near the heart, above the neck, head, mouth, genitals or for skin disorders and do not treat feet at the same time soles of feet. Also, do not press internal organs when using. Failure to do so may result in an accident or physical discomfort.

>Do not use it with other medical devices or more than 2 sets of this product, otherwise it may cause nausea or physical discomfort.

>Do not use it for purposes other than the massage described in the instruction manual, otherwise accidents and malfunctions may occur.

>Do not disassemble, repair or modify this product without authorization, otherwise it may cause malfunction or electric shock.

Precautions

! Attentions

1. If you feel unwell due to abnormality of this product, please stop using it immediately.
2. If you feel strange on your body or skin, please consult a doctor and follow the doctor's advice.
3. When there is an abnormal situation that cannot operate, please cut off the power immediately and remove it, otherwise high temperature or short circuit may occur have an accident. At the same time, contact customer service for after-sales consultation.
4. Do not plug or unplug the charging cable with wet hands, otherwise it may cause electric shock or accident.
5. Do not use it for children or people who have no ability to express consciousness, otherwise it will cause accidents or cause physical discomfort.
6. Do not use it in a place with high humidity such as a bathroom, or use the product while taking a bath otherwise you may receive a strong electric shock and damage it product.

8. Do not use the product while driving, otherwise, physical discomfort may occur and thereby cause traffic accidents.
9. Do not apply the product to the same site for too long (over 30 minutes), otherwise, muscle fatigue may occur and thereby cause physical discomfort.
10. Please wear the product correctly and symmetrically, and apply it to the cervical sweater, otherwise accidents or physical discomfort may occur.
11. Do not pull the charging cable to unplugging it, otherwise, an electric shock may occur and the product may be damaged.
12. The surface of the product will heat up after operating for a long time, which is a normal phenomenon.

Precautions

! Attentions

- Please confirm the button on the main frameworks before using the massager.
- The battery power of the product may be insufficient when being used for the first time or after being left idle for a long time. In this case, please recharge the product according to the instruction to ensure normal operation.
- Please dispose of the product according to the regulations on environmental protection of the city, otherwise, it may cause environmental pollution.
- The product is recommended for people who are 16 years old or above,

Do not use or store the product in the following places:

- ① Places with direct sunlight
- ② Places with high temperature and humidity
- ③ Places with water Dusty places
- ④ Places near fireworks
- ⑤ Places vulnerable to vibration and shock
- ⑥ Places with strong electromagnetic interference

Tips

- The product will power off automatically after running for 15 minutes. You are recommended not to use the product for over 30 minutes a day and use it as required every week.
- Please place the product at ventilated and dry places after use.
- Do not put other heavy objects on the product when using it.
- Do not pull the rubber plug at the charging port hard, otherwise, it would be easily broken and fall off.

Q&A

If you encounter any problem when using the product, please refer to the following tips:

> Turn off the power if the product remains in the faulty state or could not work.

> Users should not disassemble or repair the product by themselves. Any damages caused by such behavior would invalidate the product warranty, and we will not bear any subsequent consequences.

| Failure | Possible cause / countermeasure |
|---|--|
| The massager could not be started | <ul style="list-style-type: none"> • Please check whether the battery power is low. • Please check whether the button has been pressed (the green light would stay on if the massager is powered on). |
| The massager could not be recharged or the charging light does not work | Please check whether the cable is connected to the mainframe and the power adapter of the mobile phone. |
| The massager stopped operation suddenly | <ul style="list-style-type: none"> • Please check whether the battery power is insufficient. • The automatic timer (15 minutes) has expired. • If the problem still exists, please stop using the product and contact our maintenance service center. |

Cleaning and Maintenance

Before cleaning the neck massager, please be sure to disconnect the power supply, and do not touch the plug with wet hands.

1. Prohibit close to fire, oil, corrosive liquid and various adverse environments.
2. Only the skin-adhesive outer cloth cover can be disassembled and cleaned separately, and parts such as massage components and control panels are prohibited from getting wet.
3. Before cleaning, the outer cloth cover must be disassembled as required to ensure that the outer cloth cover is completely separated from the circuit and other non-cleanable parts.
4. The outer cloth cover is not machine washable, but can be gently hand washed, and the water temperature should not exceed 40 degrees. It is not suitable for drying and drying, but hang to dry naturally.
5. After the outer cloth cover is cleaned, other parts must be installed after the outer cloth cover is completely dry, and then turned on for use.
6. Please keep the product out of the reach of children.
7. Do not store the product in a place exposed to direct sunlight, high temperature, or humidity.
8. Please store the product in a dry and ventilated place.
9. Do not disassemble, repair or modify the product without permission, as it may cause malfunction.

Product Disposal Precautions

Please offer your support for the recycling of rechargeable batteries (lithium-ion batteries)

! Dangers

1. The battery used in this product is a special rechargeable battery and cannot be used in other products. Do not charge the rechargeable battery that has been taken out.

2. Do not throw it into the fire to make it overheated.
3. Do not pierce with nails, impact by gravity or disassemble and modify.
4. Do not connect the positive and negative poles of the battery directly with metal.
5. Do not store it together with necklaces, hairpins, etc.
6. Do not charge, use or place the device in high temperature places such as near the stove or under the hot sun.
7. The above situations can cause heat, fire, rupture and other phenomena.

! Warnings

If you encounter any problem when using the product, please refer to the following tips:

1. Please put the removed rechargeable battery out of the reach of infants and young children to prevent it from being swallowed by mistake.
2. If swallowed by mistake, please seek medical treatment immediately.
3. When the battery liquid leaks, do not touch the liquid with bare hands, and handle it as follows:
 - (1) When the battery fluid enters the eyes, there is a danger of blindness. Do not rub the eyes directly with your hands, and immediately wash them with clean water. Wash and seek medical treatment;
 - (2) When the battery fluid gets on the body or clothes, it may cause skin inflammation or injury, please rinse with clean water, if there is still unsatisfactory. If appropriate, seek medical attention immediately.
 - (3) Only the product can be decomposed when it is discarded. Failure to comply may cause fire, electric shock, injury and other accidents. If repairs are required (except for battery replacement), please consult the store where you originally purchased the product.

.....
The ion battery used in this product is a valuable resource that can be recycled. Please dispose of the ion battery after use. Take it out and hand it over to a professional organization that can recycle and recycle rechargeable batteries.

List of names and contents of toxic and hazardous substances in products

| Hazardous Substances | Name of Parts | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------|-------|
| | Hardware | PCBboard | Plasticparts | Sponge | Cloth |
| Lead PbPCB | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| Mercury Hg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cadmium Cd | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cd Hexavalent chromium Cr(VI) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Polybrominated biphenyls PBB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Polybrominated biphenyls ether PBDE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ : Indicates that the content of this hazardous substance in all homogeneous materials of this part is below the limit requirement specified in GB/T26572.

× : Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the part exceeds the limit requirement specified in GB/T26572.

Environmentally friendly use period of 10 years:

The "environmental protection use period" of this product is 10 years, and the company formulates this period according to the product design characteristics.

Only when using this product under the normal conditions described in the instruction manual of this product "Environmentally friendly use period" is only valid.



Notes

- (1) Parts and their homogeneous materials not listed but contained in the product do not contain any hazardous substances.
- (2) All the parts and their homogeneous materials containing hazardous substances listed in the above table all conform to the strict requirements for the limit on usage of hazardous substances as specified in the Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) of China. Your safety is assured while using the product.